

Phonak CROS II

Οδηγίες χρήσης



PHONAK
life is on

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

Ασύρματα μοντέλα

Phonak CROS II-312

Phonak CROS II-13

Επικόλληση σήματος CE

2014

2014

i Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν μόνο για τη συσκευή CROS. Για οδηγίες που σχετίζονται με το ακουστικό βαρηκοΐας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας.



Η συσκευή CROS

i Αν δεν είναι επιλεγμένο κανένα πλαίσιο και δεν γνωρίζετε το μοντέλο της συσκευής CROS που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας.

Μοντέλο

Τύπος μπαταρίας

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> CROS II-312 | 312 |
| <input type="checkbox"/> CROS II-13 | 13 |

Εξάρτημα για το αυτί

- Θηλή ή SlimTip
- Κλασικό εκμαγείο

Η συσκευή CROS έχει δημιουργηθεί από τη Phonak, τον παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις για προβλήματα ακοής με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αυτό το προϊόν υψηλής ποιότητας είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας και εξειδίκευσης και είναι σχεδιασμένο ώστε να σας κρατά συνδεδεμένους με την ομορφιά του ήχου! Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική επιλογή σας και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια ακουστικής απόλαυσης.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αξιοποιείτε στο έπακρο τη συσκευή CROS που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά και οφέλη, απλά επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας.

Phonak - life is on
www.phonak.com

Πίνακας περιεχομένων

Η συσκευή CROS

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Συνοπτικός οδηγός | 6 |
| 2. | Τα μέρη της συσκευής CROS | 8 |

Χρήση της συσκευής CROS


- | | | |
|----|--|----|
| 3. | Ενδείξεις αριστερής και δεξιάς συσκευής CROS | 10 |
| 4. | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση | 11 |
| 5. | Μπαταρίες | 12 |
| 6. | Τοποθέτηση της συσκευής CROS | 14 |
| 7. | Αφαίρεση της συσκευής CROS | 16 |
| 8. | Κουμπί πίεσης | 18 |
| 9. | Ρυθμιστής έντασης ήχου | 19 |

Περαιτέρω πληροφορίες


- | | | |
|-----|---|----|
| 10. | Φροντίδα και συντήρηση | 20 |
| 11. | Επισκευή και εγγύηση | 23 |
| 12. | Πληροφορίες συμμόρφωσης | 25 |
| 13. | Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων | 29 |
| 14. | Αντιμετώπιση προβλημάτων | 32 |
| 15. | Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια | 34 |

1. Συνοπτικός οδηγός

Αριστερή & δεξιά ένδειξη

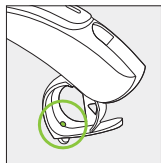

CROS II-312

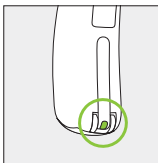


CROS II-13


Μπλε ένδειξη για την
αριστερή συσκευή.

Κόκκινη ένδειξη για
τη δεξιά συσκευή.


Αλλαγή μπαταριών

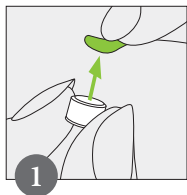

Αφαιρέστε το
αυτοκόλλητο από
τη νέα μπαταρία.

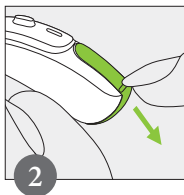


Ανοίξτε το
καπάκι της
μπαταριοθήκης.

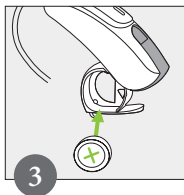


Τοποθετήστε την
μπαταρία στην
μπαταριοθήκη, με
το σύμβολο «+»
στραμμένο προς
τα επάνω.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

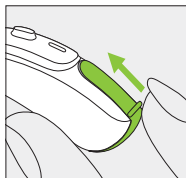


Ενε-
ργοποί-
ηση

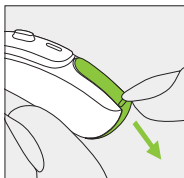


Απε-
νεργο-
ποίηση

Κουμπί πίεσης

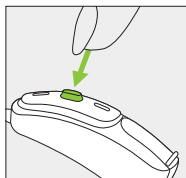

Το κουμπί πίεσης στη συσκευή σας μπορεί να έχει διάφορες λειτουργίες. Η λειτουργία επισημαίνεται στις εξατομικευμένες οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Ρυθμιστής έντασης ήχου

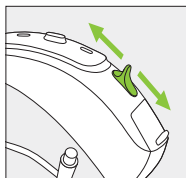

CROS II-13 μόνο:
Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα επάνω. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω.

2. Τα μέρη της συσκευής CROS

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα μοντέλα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε το δικό σας μοντέλο:


- ανατρέχοντας στην παράγραφο «Η συσκευή CROS», στη σελίδα 3
- ή συγκρίνοντας τη συσκευή CROS που διαθέτετε με τα μοντέλα που απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα. Παρατηρήστε προσεκτικά το σχήμα του ακουστικού βαρηκοΐας και αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου.

Η συσκευή CROS της Phonak είναι μια εφαρμογή για μονόπλευρη κώφωση, μονόπλευρη απώλεια ακοής ή ασύμμετρη απώλεια ακοής. Τοποθετείται στο αυτί που παρουσιάζει το πρόβλημα ακοής και μεταδίδει ασύρματα ήχο στο ακουστικό βαρηκοΐας Phonak που βρίσκεται στο άλλο αυτί.

Συσκευή Phonak CROS II + Ακουστικό βαρηκοΐας
Phonak = Σύστημα Phonak CROS

i Η συσκευή CROS II της Phonak λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με ακουστικό βαρηκοΐας Phonak Venture ή νεότερο ως δέκτη.

CROS II-312

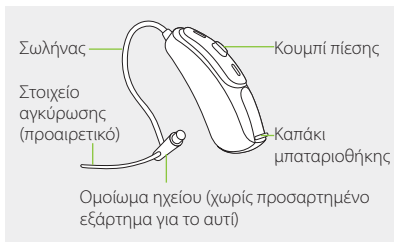

Πιθανά εξαρτήματα για το αυτί για τη συσκευή CROS II



Θηλή



SlimTip



Κλασικό εκμαγείο*

CROS II-13





* για CROS II-13 μόνο

3. Ενδείξεις αριστερής και δεξιάς συσκευής CROS


Υπάρχει μια κόκκινη ή μια μπλε ένδειξη που υποδεικνύει εάν το ακουστικό βαρηκοΐας προορίζεται για την αριστερή ή για τη δεξιά συσκευή.

CROS II-312 μόνο:

Για να ανοίξετε το καπάκι της μπαταριοθήκης, τραβήξτε προς τα κάτω την προεξοχή στο κάτω μέρος της συσκευής.

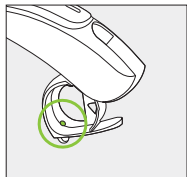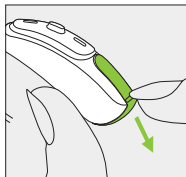

CROS II-312

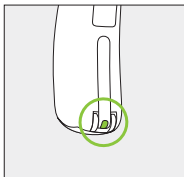

CROS II-13

Μπλε ένδειξη για την **αριστερή** συσκευή.


Κόκκινη ένδειξη για τη **δεξιά** συσκευή.

4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Το καπάκι της μπαταριοθήκης είναι επίσης ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.


1

Κλειστό καπάκι
μπαταριοθήκης = συσκευή
CROS **ενεργοποιημένη**

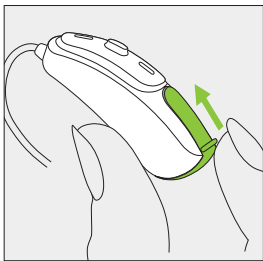


2


Ανοικτό καπάκι
μπαταριοθήκης = συσκευή
CROS **απενεργοποιημένη**

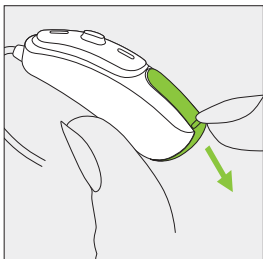


5. Μπαταρίες

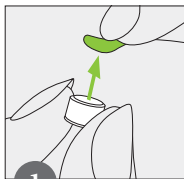

1
Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από τη νέα μπαταρία.

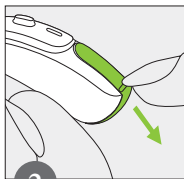


2
Ανοίξτε το καπάκι της μπαταριοθήκης.

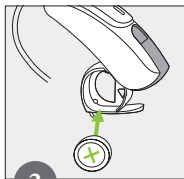

3
Τοποθετήστε την μπαταρία στην μπαταριοθήκη, με το σύμβολο «+» στραμμένο προς τα επάνω.

i Αν δυσκολεύεστε να κλείσετε το καπάκι της μπαταριοθήκης: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι το σύμβολο «+» είναι στραμμένο προς τα επάνω. Αν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή CROS δεν θα λειτουργεί και το καπάκι της μπαταριοθήκης μπορεί να υποστεί ζημιά.



Χαμηλή ισχύς μπαταρίας: Όταν η ισχύς μπαταρίας της συσκευής CROS είναι χαμηλή, ακούγονται δύο χαρακτηριστικοί ήχοι και στη συνέχεια μια μελωδία . Θα έχετε χρονικό περιθώριο περίπου 30 λεπτών για να αλλάξετε την μπαταρία (το χρονικό περιθώριο μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την μπαταρία). Συνιστούμε να έχετε πάντα εύκαιρη μια νέα μπαταρία.

Ανταλλακτική μπαταρία

Αυτή η συσκευή CROS λειτουργεί με μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα. Προσδιορίστε το σωστό μέγεθος μπαταρίας (312 ή 13):

- ανατρέχοντας στην παράγραφο «Η συσκευή CROS», στη σελίδα 3,
- ελέγχοντας την ένδειξη στην εσωτερική πλευρά του καπακιού της μπαταριοθήκης,
- ελέγχοντας τον παρακάτω πίνακα.

Μοντέλο	Μέγεθος μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα	Χρωματική ένδειξη στη συσκευασία	Κωδικός IEC	Κωδικός ANSI
CROS II-312	312	καφέ	PR41	7002ZD
CROS II-13	13	πορτοκαλί	PR48	7000ZD


i Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο μπαταρίας στη συσκευή CROS (ψευδαργύρου-αέρα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, διαβάστε επίσης το κεφάλαιο 15.2.

6. Τοποθέτηση της συσκευής CROS

6.1 Τοποθέτηση της συσκευής CROS με θηλή ή SlimTip


1

Τοποθετήστε τη συσκευή CROS πίσω από το αυτί σας.

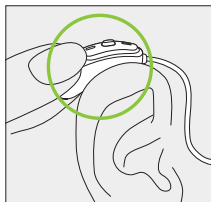


2

Εισαγάγετε το εξάρτημα για το αυτί στον ακουστικό πόρο σας.

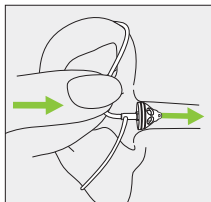

3


Αν το εξάρτημα για το αυτί είναι συνδεδεμένο με στοιχείο αγκύρωσης, τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα του αυτιού σας για να στερεώσετε με ασφάλεια τη συσκευή CROS.

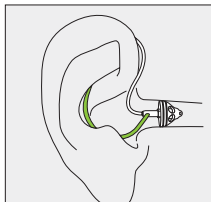

6.2 Τοποθέτηση της συσκευής CROS II-13 με κλασικό εκμαγείο


1

Φέρετε το εκμαγείο στο αυτί σας και τοποθετήστε το μέρος του ακουστικού πόρου στο εσωτερικό του ακουστικού σας πόρου.

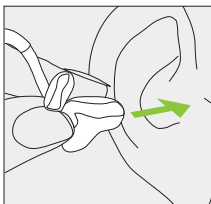


2

Τοποθετήστε τη συσκευή CROS πίσω από το αυτί σας.

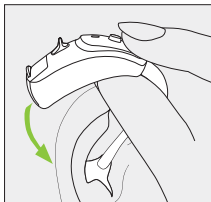

3

Εισαγάγετε το άνω τμήμα του εκμαγείου στο άνω τμήμα της κοιλότητας του αυτιού σας.

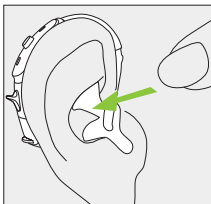


7. Αφαίρεση της συσκευής CROS

7.1 Αφαίρεση της συσκευής CROS με θηλή ή SlimTip

1

Τραβήξτε το κυρτό τμήμα του σωλήνα και αφαιρέστε τη συσκευή CROS από το πίσω μέρος του αυτιού.

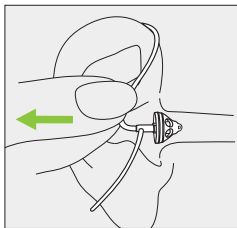


⚠ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, το εξάρτημα για το αυτί μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση της συσκευής από το αυτί. Στην απίθανη περίπτωση ενσφήνωσης του εξαρτήματος για το αυτί στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ειδικό ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.

7.2 Αφαίρεση της συσκευής CROS II-13 με κλασικό εκμαγείο


1

Ανασηκώστε τη συσκευή πάνω από το άνω τμήμα του αυτιού σας.

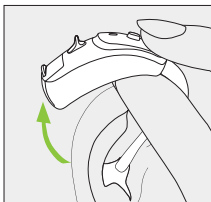

2


Πιάστε το εκμαγείο που βρίσκεται μέσα στο αυτί σας και αφαιρέστε το προσεκτικά.

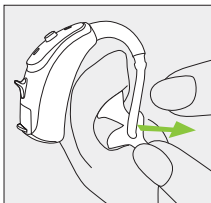

i Αποφύγετε να πιάνετε το σωλήνα για να αφαιρέσετε τη συσκευή CROS.

8. Κουμπί πίεσης


Το κουμπί πίεσης στη συσκευή CROS μπορεί να έχει διάφορες λειτουργίες ή να είναι ανενεργό. Αυτό εξαρτάται από τον προγραμματισμό που έχει γίνει στη συσκευή CROS, ο οποίος υποδεικνύεται στις εξατομικευμένες «Οδηγίες ακουστικού βαρηκοΐας» για τη συσκευή σας. Για να προμηθευτείτε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας.

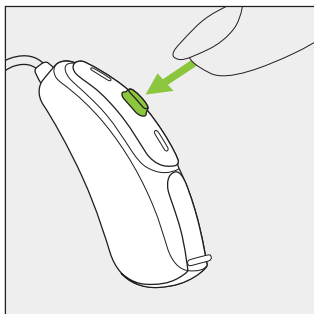

9. Ρυθμιστής έντασης ήχου

CROS II-13 μόνο:

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα επάνω. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω. Ο ρυθμιστής έντασης ήχου της συσκευής CROS μπορεί να έχει διάφορες λειτουργίες ή να είναι ανενεργός. Αυτό εξαρτάται από τον προγραμματισμό που έχει γίνει, ο οποίος υποδεικνύεται στις εξατομικευμένες «Οδηγίες ακουστικού βαρηκοΐας» για τη συσκευή σας. Για να προμηθευτείτε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθε-τιστή σας.

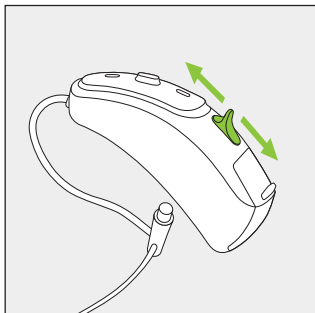

10. Φροντίδα και συντήρηση

Η προσεκτική και τακτική φροντίδα της συσκευής CROS συμβάλλει στην υψηλή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες ως κατευθυντήριες οδηγίες. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 15.2.

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρί για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να αφαιρείτε τη συσκευή CROS από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή CROS, αφήνετε το καπάκι της μπαταριοθήκης ανοικτό, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Επιβεβαιώνετε πάντα ότι η συσκευή CROS έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ασφαλές, στεγνό και καθαρό μέρος.

Η συσκευή CROS είναι ανθεκτική στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Το καπάκι της μπαταριοθήκης είναι τελείως κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σφηνώσει ξένα σώματα, όπως τρίχες, στο καπάκι της μπαταριοθήκης κατά το κλείσιμό του.
- Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται.
- Η συσκευή CROS πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

❗ Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής CROS κοντά σε νερό ενδέχεται να περιοριστεί η ροή αέρα στις μπαταρίες, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία της. Εάν η συσκευή CROS πάψει να λειτουργεί μετά από επαφή με νερό, ανατρέξτε στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, στο κεφάλαιο 14.

Καθημερινά

Ελέγχετε εάν υπάρχουν στο εξάρτημα για το αυτί (θηλή ή SlimTip) εναποθέσεις κυψελίδας αυτιού και υγρασίας. Καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι ή χρησιμοποιείτε τη μικρή βούρτσα που περιέχει η θήκη. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ.λπ., για τον καθαρισμό της συσκευής CROS. Δεν συνιστάται το ξέπλυμα με νερό. Εάν απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός της συσκευής CROS, απευθυνθείτε στον ακοοπροσθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις κάψουλες αφύγρανσης.

Εβδομαδιαία

Καθαρίζετε το εξάρτημα για το αυτί (θηλή ή SlimTip) με μαλακό, υγρό πανί ή με ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοΐας. Για πιο αναλυτικές οδηγίες συντήρησης ή για οδηγίες σχολαστικού καθαρισμού, απευθυνθείτε στον ακοοπροσθετιστή σας.

Μηνιαία

Ελέγχετε εάν ο σωλήνας έχει αποχρωματιστεί, σκληρύνει ή ραγίσει. Εάν διαπιστωθούν μεταβολές αυτού του τύπου, ο σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας.

11. Επίσκεψη και εγγύηση

Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροσθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή CROS.

Διεθνής εγγύηση

Η Rhonak παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στην ίδια τη συσκευή CROS, αλλά όχι σε εξαρτήματα όπως μπαταρίες, σωλήνες, εκμαγεία, εξωτερικοί δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολικής καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει τυχόν επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροσθετιστή στο χώρο εργασίας του.

Σειριακός αριθμός: Εξουσιοδοτημένος
 ακοοπροσθετιστής
 (σφραγίδα/υπογραφή):

Ημερομηνία αγοράς:

12. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Phonak AG δηλώνει διά του παρόντος ότι το συγκεκριμένο προϊόν της Phonak πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της οδηγίας 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Phonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται σε λίστα στη διεύθυνση www.phonak.com (Phonak worldwide locations - Αντιπροσωπείες της Phonak σε ολόκληρο τον κόσμο).

Αυστραλία:

Κωδικός αριθμός προμηθευτή

 N15398

Νέα Ζηλανδία:

Κωδικός αριθμός προμηθευτή

Z1285

Τα ασύρματα μοντέλα που αναφέρονται στη σελίδα 2 είναι πιστοποιημένα βάσει των παρακάτω:

Phonak CROS II-312

ΗΠΑ
Καναδάς

Αρ. αναγνώρισης FCC: KWC-WHSRIC2
IC: 2262A-WHSRIC2

Phonak CROS II-13

ΗΠΑ
Καναδάς

Αρ. αναγνώρισης FCC: KWC-WHSRIC4
IC: 2262A-WHSRIC4

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και

2) η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση 2:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Phonak μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της άδειας χειρισμού της συσκευής αυτής βάσει των κανονισμών FCC.

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά.

Τα όρια αυτά προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για υποστήριξη.

13. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Phonak AG επιβεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν της Phonak – συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων– πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της οδηγίας 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (ΡΤΤΕ). Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο των παραπάνω οδηγιών.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια της συσκευής χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.



Υποδεικνύει τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, όπως ορίζεται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ.



Ετικέτα συμμόρφωσης ΗΜΣ και
ραδιοεπικοινωνιών, Αυστραλία.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης
πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του
τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες
οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης
πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές
προειδοποιήσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για το χειρισμό και
την ασφάλεια του προϊόντος.

Συνθήκες λειτουργίας

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να
λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς,
όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο
τρόπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά
στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: -20° έως $+60^{\circ}$ Κελσίου (-4° έως $+140^{\circ}$ Φαρενάιτ).



Υγρασία κατά τη μεταφορά: Έως 90% (χωρίς συμπύκνωση). Υγρασία κατά την αποθήκευση: 0% έως 70%, εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Για οδηγίες σχετικά με την αφύγρανση της συσκευής μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο 15.2.



Ατμοσφαιρική πίεση: 200 hPA έως 1500 hPA




Το σύμβολο με το διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα κοινά οικιακά απόβλητα. Οι παλιές ή μη χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται στον ακοοπροσθετιστή για απόρριψη. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

14. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα

Η συσκευή CROS δεν λειτουργεί

Το ακουστικό βαρηκοΐας εκπέμπει δύο χαρακτηριστικούς ήχους

Το ακουστικό βαρηκοΐας εκπέμπει δύο χαρακτηριστικούς ήχους και στη συνέχεια μια μελωδία 

Ο ήχος ενεργοποιείται και απενεργοποιείται (μη συνεχής λειτουργία)

Αιτίες

Εξαντλημένη μπαταρία

Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά


Απενεργοποιημένη συσκευή CROS

Απενεργοποιημένο ακουστικό βαρηκοΐας

Ένδειξη για χαμηλή ισχύ μπαταρίας ακουστικού βαρηκοΐας

Ένδειξη για χαμηλή ισχύ μπαταρίας συσκευής CROS

Υγρασία στην μπαταρία του ακουστικού βαρηκοΐας ή της συσκευής CROS

 Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας για υποστήριξη

Τι να κάνετε

Αλλάξτε μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)

Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή CROS κλείνοντας εντελώς το καπάκι της μπαταριοθήκης (κεφάλαιο 4)

Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας κλείνοντας εντελώς το καπάκι της μπαταριοθήκης (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας αν χρειάζεται)

Αλλάξτε την μπαταρία του ακουστικού βαρηκοΐας εντός των επόμενων 30 λεπτών (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας αν χρειάζεται)

Αλλάξτε μπαταρία της συσκευής CROS εντός των επόμενων 30 λεπτών (κεφάλαια 1 + 5)

Σκουπίστε τις μπαταρίες και το περίβλημα του ακουστικού βαρηκοΐας και της συσκευής CROS με στεγνό πανί


15. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια


Διαβάστε τις πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή CROS.


Η συσκευή CROS δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν αποτρέπει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.


Η χρήση της συσκευής CROS αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεανάγνωση.


15.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου


 Η συσκευή CROS προορίζεται για τη μετάδοση ήχου σε ακουστικό βαρηκοΐας τοποθετημένο στο αυτί με την καλύτερη ακοή, αντισταθμίζοντας έτσι την περιορισμένη ακοή στο άλλο αυτί. Το σύστημα CROS (προγραμματισμένο ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άλλο άτομο, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή.


 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο σύστημα CROS αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Phonak. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο σύστημα CROS.


 Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα CROS σε εκρηκτικά περιβάλλοντα (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, ατμόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο ή χώροι στους οποίους γίνεται χειρισμός εύφλεκτων αναισθητικών) ή σε χώρους όπου απαγορεύεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός.


 Οι μπαταρίες του ακουστικού βαρηκοΐας είναι τοξικές σε περίπτωση κατάποσης! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση ή κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης των μπαταριών, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό!


 Αν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί, αν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος και ταχεία συσσώρευση υπολειμμάτων κυψελίδας αυτιού, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή ή τον ιατρό σας.

 Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, το εξάρτημα για το αυτί μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Στην απίθανη περίπτωση ενσφήνωσης του εξαρτήματος για το αυτί στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.

 Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι τα προειδοποιητικά σήματα ή οι ήχοι που προέρχονται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή εν μέρει.

 Το σύστημα CROS δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών. Περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό σε περίπτωση κατάποσης από παιδιά. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση ή κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό ή μεταβείτε σε νοσοκομείο.

 Εξωτερικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν μόνο εάν έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα IECXXXXX. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Phonak AG.

 Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για άτομα με ενεργές εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές κ.λπ.):

- Διατηρείτε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας ή τη συσκευή CROS σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα. Εάν προκύψουν παρεμβολές, μην χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά βαρηκοΐας ή τη συσκευή CROS και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού εμφυτεύματος.

Λάβετε υπόψη ότι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ.λπ.

- Τυχόν μαγνήτες (π.χ. εργαλείο για μπαταρίες, μαγνήτης EasyPhone κ.λπ.) πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα.

15.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος

- i** Οι συσκευές CROS της Phonak είναι ανθεκτικές στο νερό αλλά δεν είναι αδιάβροχες. Είναι σχεδιασμένες ώστε να αντέχουν την καταπόνηση που προκαλείται κατά τις τυπικές δραστηριότητες και την περιστασιακή, ακούσια έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή CROS σε νερό! Οι συσκευές CROS της Phonak δεν είναι ειδικά σχεδιασμένες για τακτική εμβάπτιση σε νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά την κολύμβηση ή όταν κάνετε μπάνιο. Αφαιρείτε πάντα τη συσκευή CROS πριν από αυτές τις δραστηριότητες, καθώς περιλαμβάνει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- i** Μην πλένετε ποτέ τις εισόδους του μικροφώνου. Μπορεί να χάσει τις ειδικές ακουστικές του ιδιότητες.
- i** Προστατεύετε τη συσκευή CROS από τη θερμότητα (μην την αφήνετε ποτέ κοντά σε παράθυρο ή στο αυτοκίνητο). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε τη συσκευή CROS. Για τις ενδεδειγμένες μεθόδους αφύγρανσης, ρωτήστε τον ακοοπροσθετιστή σας.
- i** Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή CROS, αφήνετε το καπάκι της μπαταριοθήκης ανοικτό, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Επιβεβαιώνετε πάντα ότι η συσκευή CROS έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε τη συσκευή CROS σε ασφαλές, στεγνό και καθαρό μέρος.

-
- i** Προφυλάσσετε τη συσκευή CROS από πτώσεις! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή CROS.
 - i** Χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες για τη συσκευή CROS. Σε περίπτωση που μια μπαταρία εμφανίζει διαρροή, αντικαταστήστε την αμέσως με μια καινούρια για την αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Μπορείτε να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον ακοοπροσθετιστή σας.
 - i** Η τάση των μπαταριών που χρησιμοποιούνται στη συσκευή CROS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5 Volt. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αργύρου-ψευδαργύρου ή μπαταρίες Li-ion (ιόντων λιθίου), καθώς οι μπαταρίες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη συσκευή CROS. Ο πίνακας στο κεφάλαιο 5 εξηγεί ακριβώς ποιος τύπος μπαταρίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τη συσκευή CROS που διαθέτετε.
 - i** Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή CROS για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε την μπαταρία.

i Η λειτουργία της συσκευής CROS μπορεί να επηρεαστεί από ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφαιρείτε και φυλάσσετε τη συσκευή εκτός της αίθουσας/ του χώρου εξέτασης, πριν υποβληθείτε σε:

- Ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτίνες X (και σαρώσεις CT).
- Ιατρικές εξετάσεις με σαρώσεις MRI/NMRI, κατά τις οποίες δημιουργούνται μαγνητικά πεδία.
- Κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (σε αεροδρόμια κ.λπ.) δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τις συσκευές CROS. Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ακτίνες X, εφαρμόζεται εξαιρετικά χαμηλή δόση που δεν επηρεάζει τη συσκευή CROS.

i Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή CROS σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Κατασκευαστής:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Ελβετία

www.phonak.com

Ο ακοοπροθετιστής σας:

