



Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

για την Ελλάδα:

www.phonak-hellas.com

www.phonak.com



Phonak Naída Q

(Q90/Q70/Q50/Q30)

Οδηγίες χρήσης



PHONAK
life is on

Πίνακας περιεχομένων

1. Καλώς ήρθατε	5
2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας	6
Προειδοποιήσεις κινδύνου	6
Πληροφορίες ασφάλειας	10
3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας	13
4. Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας	17
Βήμα 1: Εξοικείωση με το ακουστικό βαρηκοΐας σας	17
Βήμα 2: Προετοιμασία μπαταρίας	20
Βήμα 3: Τοποθέτηση μπαταρίας	21
Βήμα 4: Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας	22
Βήμα 5: Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας	23
Βήμα 6: Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί	29
Βήμα 7: Επιλογή του ακουστικού προγράμματος ήχου μέσα στο αυτί	31
Βήμα 8. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας	33
Βήμα 9. Απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας	35
Βήμα 10: Αλλαγή της μπαταρίας	36

Βήμα 11: Αλλαγή της μπαταρίας σε ακουστικό βαρηκοΐας με μπαταριοθήκη ασφαλείας	37
Βήμα 12: Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο δέκτη Roger	41
Βήμα 13: Σύνδεση του υποδοχέα ήχου στο ακουστικό βαρηκοΐας	43
Βήμα 14: Σύνδεση του πανδέκτη στον υποδοχέα ήχου	44
Βήμα 15: Αφαίρεση του υποδοχέα ήχου από το ακουστικό βαρηκοΐας	45
5. Φροντίδα και συντήρηση	46
6. Αντιμετώπιση προβλημάτων	49
7. Συνομιλία σε θόρυβο ή από απόσταση	51
7.1 Επικοινωνία σε θόρυβο και από απόσταση με το σύστημα Roger	51
7.2 Πραγματοποιώντας κλήση με το Phonak Dect CP1	53
7.3 Συνδεσιμότητα με πηγές ήχου και τηλεχειριστήρια	54
8. Επισκευή και εγγύηση	55
9. Πληροφορίες συμμόρφωσης	57
10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων	60

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

Ασύρματα μοντέλα	Σήμανση CE
Phonak Naída Q90-UP	2013
Phonak Naída Q90-SP	2013
Phonak Naída Q90-RIC	2013
Phonak Naída Q70-UP	2013
Phonak Naída Q70-SP	2013
Phonak Naída Q70-RIC	2013
Phonak Naída Q50-UP	2013
Phonak Naída Q50-SP	2013
Phonak Naída Q50-RIC	2013
Phonak Naída Q30-UP	2013
Phonak Naída Q30-SP	2013
Phonak Naída Q30-RIC	2013

1. Καλώς ήρθατε

Το νέο σας ακουστικό βαρηκοΐας είναι ένα προϊόν υψηλής ελβετικής ποιότητας. Κατασκευάστηκε από την Phonak, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στην τεχνολογία ακουστικών βαρηκοΐας. Το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει την πιο σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία ακουστικών που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή στην αγορά.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με το καινούργιο σας ακουστικό σύστημα. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά, προκειμένου να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες που μπορούν τα νέα σας βοηθήματα να σας προσφέρουν. Με τη σωστή χρήση και φροντίδα, θα είστε σε θέση να απολαύσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για πολλά χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ακοο-προθετιστή σας.

Phonak – life is on

www.phonak.com




0459

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν αποτρέπει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεανάγνωση.

2.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου

 Τα ακουστικά βαρηκοΐας προορίζονται για ενίσχυση και μετάδοση ήχου στα αυτιά σε περιπτώσεις όπου η ακοή είναι περιορισμένη. Τα ακουστικά (προγραμματισμένα ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από κανέναν άλλο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.

-
- ⚠ Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο ακουστικό βαρηκοΐας αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Phonak. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

 - ⚠ Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων).

 - ⚠ Οι μπαταρίες του ακουστικού βαρηκοΐας είναι τοξικές σε περίπτωση κατάποσης! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης των μπαταριών, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό!

 - ⚠ Για την αποφυγή κατάποσης της μπαταρίας ή μικρών κομματιών της συσκευής, να χρησιμοποιούνται προστατευτικά ασφαλείας στην μπαταριοθήκη, στη γωνία του ακουστικού ή στον δέκτη Roger / FM (αν υπάρχει) για παιδιά μικρότερα των 36 μηνών. Σε περίπτωση που κάτι από τα παραπάνω έχει υποστεί βλάβη είτε από άσκηση υπερβολικής βίας ή από ακατάλληλο εργαλείο, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ακοοπροθετιστή σας για επισκευή ή αντικατάσταση.

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- ⚠ Εάν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί ή εάν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος, καθώς και ταχεία συσσώρευση κυψελίδας στο αυτί επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας.
- ⚠ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στο κανάλι του αυτιού κατά την αφαίρεση του σωλήνα ακρόασης. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, επισκεφθείτε έναν γιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.
- ⚠ Τα ακουστικά προγράμματα σε λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου, μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Έχετε υπόψιν σας ότι προειδοποιητικά σήματα ή ήχοι που προέρχονται πίσω από το χρήστη, όπως π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή μερικώς.
- ⚠ Το ακουστικό βαρηκοΐας περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό σε περίπτωση κατάποσης από παιδιά. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό ή μεταβείτε σε νοσοκομείο.

⚠ Εξωτερικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν μόνο εάν έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα IECXXXXX. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από την Phonak AG.

⚠ Το παρακάτω ισχύει μόνο για τα άτομα με ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (βηματοδότες, απινιδωτές, κλπ):

- Κρατήστε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας τουλάχιστον 15 εκατοστά (6 ίντσες) μακριά από ενεργό εμφύτευμα. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε παρεμβολή, μην χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι οι παρεμβολές μπορεί επίσης να προκληθούν από γραμμές μεταφοράς ενέργειας, ηλεκτροστατική εκκένωση, ανιχνευτές μετάλλων αεροδρομίου κ.λπ.
- Κρατήστε τις συσκευές με ισχυρούς μαγνήτες τουλάχιστον 15 εκατοστά μακριά από το ενεργό εμφύτευμα.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ασύρματα αξεσουάρ για τα ακουστικά σας βοηθήματα. Ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

2.2 Πληροφορίες ασφάλειας

- ① Τα ακουστικά βαρηκοΐας Phonak είναι ανθεκτικά στο νερό αλλά δεν είναι αδιάβροχα. Έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε κανονικές δραστηριότητες και στην κατά λάθος έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Ποτέ μη βυθίζετε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας στο νερό. Τα βοηθήματα ακοής Phonak δεν έχουν σχεδιαστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε νερό ή για δραστηριότητες όπως το κολύμπι ή το μπάνιο. Πάντα να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας πριν από αυτές τις δραστηριότητες καθώς διαθέτουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- ① Μην πλένετε και μην καθαρίζετε τις εισόδους του μικροφώνου. Μπορεί να χάσει τις ειδικές ακουστικές του ιδιότητες.

- ① Προστατεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη θερμότητα (μην το αφήνετε ποτέ κοντά σε παράθυρο ή στο αυτοκίνητο). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης, για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Για τις κατάλληλες μεθόδους αφύγρανσης, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

-
- ① Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήνετε την μπαταριοθήκη ανοικτή, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλή, στεγνό και καθαρό χώρο.
 - ① Μη ρίχνετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.
 - ① Χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Σε περίπτωση που μια μπαταρία εμφανίζει διαρροή, αντικαταστήστε την αμέσως με μια καινούρια για την αποφυγή ερεθισμών του δέρματος. Μπορείτε να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον ακοοπροθετιστή σας.
 - ① Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 1,5 Volt. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες silver-zinc ή Li-ion (ιόντων λιθίου), διότι μπορεί να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ο πίνακας στο κεφάλαιο 3 εξηγεί ακριβώς το είδος της μπαταρίας που ταιριάζει στο ακουστικό σας σύστημα.

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

❶ Αφαιρείτε την μπαταρία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

❶ Ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτινοβολία, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ορθή λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας σας. Αφαιρέστε τα πριν υποβληθείτε σε εξετάσεις:

- Ιατρικές και οδοντιατρικές με ακτίνες Χ (επίσης αξονική τομογραφία)

- Μαγνητική τομογραφία και γενικά όπου υπάρχουν μαγνητικά πεδία

Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (αεροδρόμια κλπ). Αν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, η ακτινοβολία είναι μικρή και δεν επηρεάζει την ορθή λειτουργία των ακουστικών.

❶ Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Στις παρακάτω οδηγίες χρήσης περιγράφονται τρία μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας: Τα **UltraPower (UP)**, τα **SuperPower (SP)** και τα **Receiver-In-Canal Technology (RIC)**

Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορα εκμαγεία.

Στις παρακάτω σελίδες, χρησιμοποιήστε τα σχέδια με τις επισημάνσεις, για να εντοπίσετε το ακουστικό βαρηκοΐας και το εκμαγείο που χρησιμοποιείτε.

Στον πίνακα που ακολουθεί υποδεικνύεται η μπαταρία που χρειάζεστε ανάλογα με το μοντέλο ακουστικού βαρηκοΐας που διαθέτετε.


Μοντέλο	Μέγεθος μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρος (ένδειξη στη συσκευασία)	Κωδικός IEC	Κωδικός ANSI
UP	675 (μπλε)	PR44	7003ZD
SP	13 (πορτοκαλί)	PR48	7000ZD
RIC	13 (πορτοκαλί)	PR48	7000ZD

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο μπαταρίας (zinc-air). Διαβάστε επίσης το κεφάλαιο 2.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων.

3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλα UltraPower και SuperPower


Επιλογή Α: με κλασικό εκμαγείο

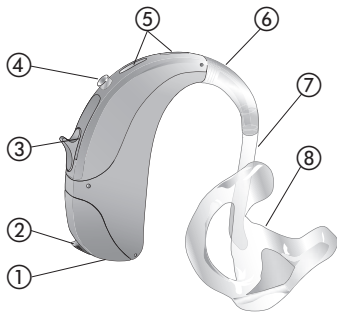

- ① Μεγάφωνο δεξιού ή αριστερού αυτιού
(δεξί = κόκκινο, αριστερό = μπλε)
- ② Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ③ Ρυθμιστής έντασης ήχου
- ④ Κουμπί προγραμμάτων
- ⑤ Είσοδοι μικροφώνου με σύστημα προστασίας Wind & Weather
- ⑥ Γωνία/έξοδος ήχου
- ⑦ Ακουστικός σωλήνας
- ⑧ Κλασικό εκμαγείο (αποσπώμενο)

Μοντέλα UltraPower και SuperPower

Επιλογή Β: ακουστικός σωλήνας Power Slim με κλασικό εκμαγείο

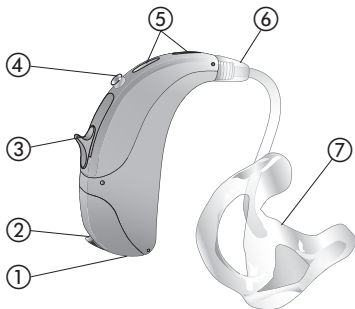

- ① Μεγάφωνο δεξιού ή αριστερού αυτιού
(δεξί = κόκκινο, αριστερό = μπλε)
- ② Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ③ Ρυθμιστής έντασης ήχου
- ④ Κουμπί προγραμμάτων
- ⑤ Είσοδοι μικροφώνου με σύστημα προστασίας Wind & Weather
- ⑥ Ακουστικός σωλήνας
- ⑦ Κλασικό εκμαγείο (αποσπώμενο)


3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλο RIC

Επιλογή A: με εκμαγείο



Επιλογή B: με θηλή

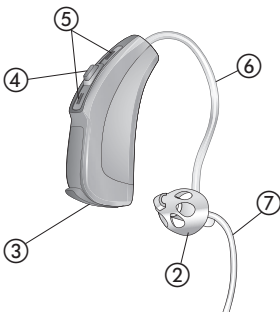

- ① Εκμαγείο
- ② Θηλή (αποσπώμενη)
- ③ Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- ④ Κουμπί προγραμμάτων ή ρυθμιστής έντασης ήχου
- ⑤ Είσοδοι μικροφώνου με προστασία
- ⑥ Εξωτερικό μεγάφωνο
- ⑦ Κορδόνι συγκράτησης

4. Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Στο παρακάτω κεφάλαιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Ακολουθήστε τα βήματα αυτά προσεκτικά.


Βήμα 1: Εξοικείωση με το ακουστικό βαρηκοΐας σας

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στο χέρι σας και δοκιμάστε τα χειριστήριά του. Με τον τρόπο αυτό, θα εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και θα τα χρησιμοποιείτε πιο εύκολα αργότερα, όταν φοράτε το ακουστικό βαρηκοΐας.

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλα UltraPower και SuperPower

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα πάνω. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω (Εικ. 1α).

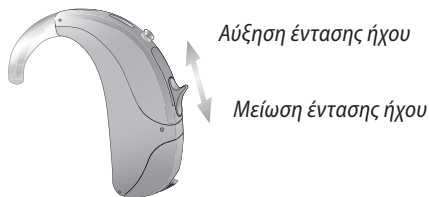

Εικ. 1α

Για να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί προγραμμάτων που απεικονίζεται παρακάτω (Εικ. 1β).




Εικ. 1β

Μοντέλα RIC

Ο ακοοπροθετιστής σας μπορεί να διαμορφώσει το κουμπί πίεσης του ακουστικού βαρηκοΐας σας είτε ως ρυθμιστή έντασης ήχου είτε ως επιλογή προγραμμάτων (δεν αφορά μοντέλα Q30)


Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο δεξί ακουστικό βαρηκοΐας. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας (Εικ. 1γ).

*Μείωση
έντασης ήχου*

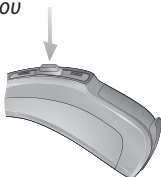

*Αριστερό
ακουστικό βαρηκοΐας*

*Αύξηση
έντασης ήχου*

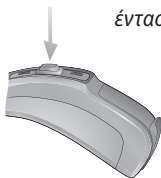


*Δεξί
ακουστικό βαρηκοΐας*

Εικ. 1γ

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας


Για να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί (Εικ. 1δ).

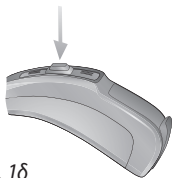

Εικ. 1δ

Βήμα 2: Προετοιμασία μπαταρίας

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την καινούρια μπαταρία (Εικ. 2). Περιμένετε δύο λεπτά πριν από την τοποθέτηση για να ενεργοποιηθεί η μπαταρία.

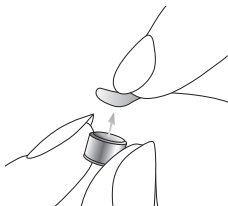


Εικ. 2

Βήμα 3: Τοποθέτηση μπαταρίας


Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στο χέρι σας και ανοίξτε το καπάκι της μπαταριοθήκης (Εικ. 3α/3γ). Τοποθετήστε την μπαταρία με τέτοιο τρόπο, ώστε το σύμβολο + της μπαταρίας να είναι στραμμένο προς το μέρος σας (Εικ. 3β/3δ).

Μοντέλα UP και SP

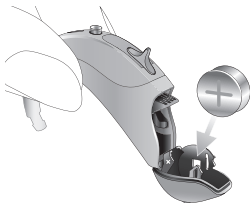

Εικ. 3α

Μοντέλα RIC

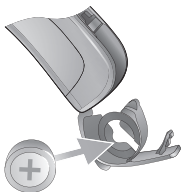

Εικ. 3γ



Εικ. 3β




Εικ. 3δ

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 4: Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας


Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας κλείνοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 4α/β).

Μοντέλα UP και SP

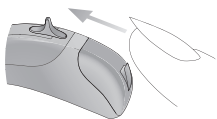

Εικ. 4α

Μοντέλα RIC

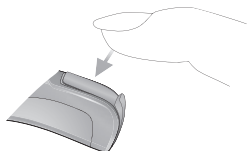

Εικ. 4β

- ❶ **Ανοίξτε και κλείστε απαλά και προσεκτικά την μπαταριοθήκη.**
- ❷ **Ελέγξτε εάν υπάρχει αντίσταση κατά το κλείσιμο της μπαταριοθήκης. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση και κατεύθυνση. Εάν η μπαταρία τοποθετηθεί με εσφαλμένο τρόπο, το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα λειτουργεί και η μπαταριοθήκη μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι πλέον ενεργοποιημένο. Μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. (Όταν φορέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα).

Βήμα 5: Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας

Στο βήμα αυτό παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος τοποθέτησης του ακουστικού βαρηκοΐας. Οι οδηγίες ισχύουν για τα μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας **UltraPower**, **SuperPower** και **RIC**. Ο τρόπος τοποθέτησης του ακουστικού βαρηκοΐας εξαρτάται από τον τύπο του εκμαγείου.

- ① **Κάθε ακουστικό βαρηκοΐας προγραμματίζεται ξεχωριστά για το δεξί ή το αριστερό αυτί. Αρχικά, εντοπίστε το δεξί και το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας, ώστε να το τοποθετήσετε στο σωστό αυτί.**

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 5.1 Εντοπισμός των ακουστικών βαρηκοΐας για το δεξί και το αριστερό αυτί

Χρωματική ένδειξη

δεξί = κόκκινο


αριστερό = μπλε

Μοντέλα UP και SP



Εικ. 5α

Μοντέλο RIC

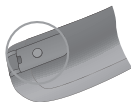


Εικ. 5β

Βήμα 5.2 Τοποθέτηση ακουστικού βαρηκοΐας Ultra Power ή SuperPower με κλασικό εκμαγείο

Πριν τοποθετήσετε το εκμαγείο, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του βρίσκεται στη σωστή θέση, πάνω από τη γωνία του ακουστικού βαρηκοΐας. Με το δεξί σας χέρι, κρατήστε το εκμαγείο για το δεξί αυτί (κόκκινη ένδειξη στο ακουστικό βαρηκοΐας, βλ. βήμα 5.1) ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη (*Εικ. 5γ*).

Κρατήστε το εκμαγείο κοντά στο αυτί σας (*Εικ. 5γ*). Τοποθετήστε το εκμαγείο στην είσοδο του ακουστικού σας πόρου (*Εικ. 5γ*). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί σας (*Εικ. 5δ*). Τοποθετήστε το άνω τμήμα του εκμαγείου στο άνω μέρος της κοιλότητας του αυτιού σας (*Εικ. 5ε*).

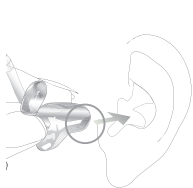

Εικ. 5γ



Εικ. 5δ



Εικ. 5ε

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα το ακουστικό βαρηκοΐας, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι σας, για να τραβήξετε προσεκτικά το λοβό του αυτιού σας προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό, ο ακουστικός πόρος ανοίγει λίγο περισσότερο και μπορείτε να περιστρέψετε το εκμαγείο μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

Ελέγξτε την εφαρμογή ψηλαφώντας την κοιλότητα του αυτιού. Όταν έχει τοποθετηθεί σωστά, θα πρέπει να αισθανθείτε κατά την ψηλάφηση το περίγραμμα της κοιλότητας του αυτιού και όχι το ακουστικό βαρηκοΐας (Εικ. 5στ). Στην αρχή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν καθρέφτη για τον έλεγχο αυτό.



Εικ. 5στ

Το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας έχει πλέον τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας με τον ίδιο τρόπο (μπλε ένδειξη, βλ. βήμα 5.1).

Βήμα 5.3 Τοποθέτηση ακουστικού βαρηκοΐας Ultra Power ή SuperPower με σωλήνα Power Slim και κλασικό εκμαγείο


Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως περιγράφονται στο βήμα 5.2 καθώς η διαδικασία είναι πανομοιότυπη.

Βήμα 5.4 Τοποθέτηση ακουστικού βαρηκοΐας RIC με εκμαγείο

Με το δεξί σας χέρι, τοποθετήστε το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας (κόκκινη ένδειξη στο ακουστικό, βλ. βήμα 5.1) πίσω από το δεξί αυτί (Εικ. 5ζ). Κρατήστε τον ακουστικό σωλήνα με τον ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη. Τοποθετήστε το εκμαγείο βαθιά μέσα στον ακουστικό πόρο ώστε ο ακουστικός σωλήνας να βρίσκεται σε επίπεδη θέση στο αυτί σας (Εικ. 5η).



Εικ. 5ζ

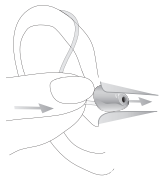

Εικ. 5η


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα το ακουστικό βαρηκοΐας, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι σας, για να τραβήξετε προσεκτικά το λοβό του αυτιού σας προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό, ο ακουστικός πόρος ανοίγει λίγο περισσότερο και μπορείτε να περιστρέψετε τη θηλή μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

Το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας έχει πλέον τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας με τον ίδιο τρόπο (μπλε ένδειξη, βλ. βήμα 5.1).

Βήμα 5.5 Τοποθέτηση ακουστικού βαρηκοΐας RIC με θηλή

Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως περιγράφονται στο Βήμα 5.4 καθώς η διαδικασία είναι η πανομοιότυπη. Εάν το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει κορδόνι συγκράτησης, τοποθετήστε το με πίεση στην κοιλότητα του αυτιού, ώστε η θηλή να συγκρατείται στον ακουστικό πόρο (Εικ. 5θ).

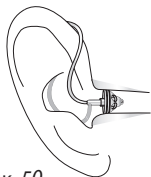


Εικ. 5θ

Βήμα 6: Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί

Βήμα 6.1 Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί σε μοντέλα UltraPower ή SuperPower

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα πάνω. Για να τη μειώσετε, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω με το δείκτη σας. Στηρίξτε ελαφρά το ακουστικό βαρηκοΐας με τον αντίχειρά σας (Εικ. 6α).

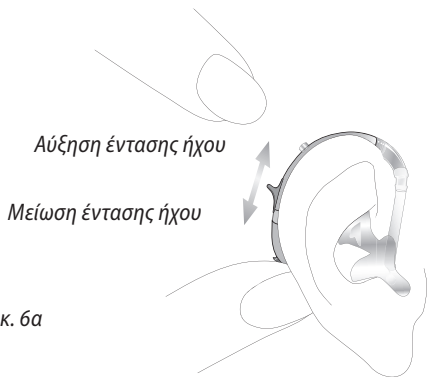

Εικ. 6α

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας


Βήμα 6.2 Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί σε ένα μοντέλο RIC

Ο ακοοπροθετιστής σας μπορεί να διαμορφώσει το κουμπί πίεσης του ακουστικού βαρηκοΐας σας είτε ως ρυθμιστή έντασης ήχου είτε ως επιλογή προγραμμάτων (δεν αφορά τα μοντέλα Q30).

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο δεξί ακουστικό βαρηκοΐας. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας. Στηρίξτε ελαφρά το ακουστικό βαρηκοΐας με τον αντίχειρά σας (Εικ. 6β).


Μείωση έντασης ήχου

*Αριστερό
ακουστικό
βαρηκοΐας*

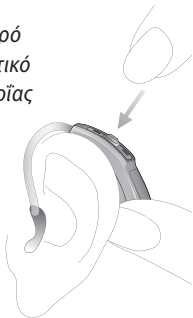

Αύξηση έντασης ήχου

*Δεξί
ακουστικό
βαρηκοΐας*

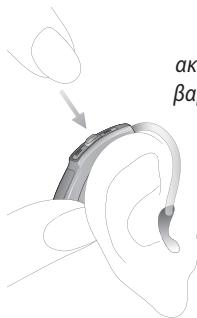


Εικ. 6β

Βήμα 7: Επιλογή του ακουστικού προγράμματος ήχου μέσα στο αυτί

Βήμα 7.1 Επιλογή του ακουστικού προγράμματος ήχου μέσα στο αυτί σε μοντέλο UltraPower ή SuperPower

Για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί προγραμμάτων που απεικονίζεται παρακάτω (Εικ. 7α).

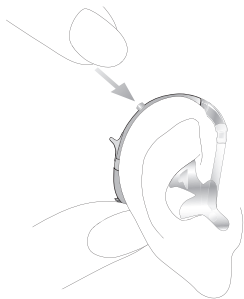

Εικ. 7α

Εάν το πατήσετε ξανά, θα μεταβείτε στο επόμενο πρόγραμμα. Η αλλαγή προγράμματος υποδεικνύεται από ένα σήμα.


Το ηχητικό σήμα θα ακουστεί μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει το ακουστικό βαρηκοΐας και εάν το έχετε τοποθετήσει σωστά πίσω από το αυτί.

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 7.2 Επιλογή του ακουστικού προγράμματος ήχου μέσα στο αυτί σε μοντέλο RIC

Ο ακοοπροθετιστής σας μπορεί να διαμορφώσει το κουμπί πίεσης του ακουστικού βαρηκοΐας σας είτε ως ρυθμιστή έντασης ήχου είτε ως επιλογή προγραμμάτων (δεν αφορά τα μοντέλα Q30).

Για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί προγραμμάτων απεικονίζεται (Εικ. 7β).

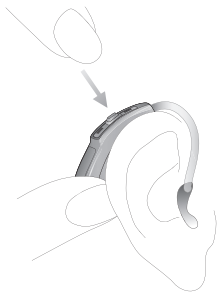


Εικ. 7β

Εάν πατήσετε ξανά το διακόπτη, θα μεταβείτε στο επόμενο πρόγραμμα. Η αλλαγή προγράμματος υποδεικνύεται από ένα σήμα. Ο τόνος σήματος θα ακουστεί μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει τα ακουστικά βαρηκοΐας και εάν τα έχετε τοποθετήσει σωστά πίσω από το αυτί.

Βήμα 8. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας


Βήμα 8.1 Αφαίρεση ακουστικού βαρηκοΐας UltraPower ή SuperPower με κλασσικό εκμαγείο

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί (μην αγγίζετε το σωλήνα!), ανασηκώστε το πάνω από τα άνω τμήμα του αυτιού σας και, στη συνέχεια, αφήστε το προσεκτικά (Εικ. 8α).

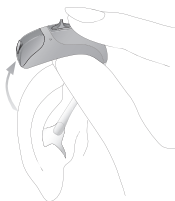

Εικ. 8α

Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα και το δείκτη σας, για να κρατήσετε το εκμαγείο στο αυτί σας (όχι το σωλήνα!) και αφαιρέστε το προσεκτικά από το αυτί σας (Εικ. 8β).

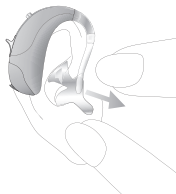

Εικ. 8β


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 8.2 Αφαίρεση ακουστικού βαρηκοΐας UltraPower ή SuperPower με σωλήνα Power Slim και κλασικό εκμαγείο

Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως περιγράφονται στο Βήμα 8.2 καθώς η διαδικασία είναι πανομοιότυπη.

Βήμα 8.3 Αφαίρεση ακουστικού βαρηκοΐας RIC με κλασικό εκμαγείο

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας από τον ακουστικό σωλήνα και αφαιρέστε το προσεκτικά από το αυτί σας (Εικ. 8γ).

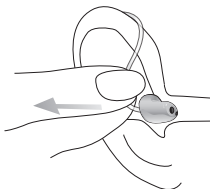

Εικ. 8γ

Βήμα 8.4 Αφαίρεση ακουστικού βαρηκοΐας RIC με θηλή


Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως περιγράφονται στο Βήμα 8.3 καθώς η διαδικασία είναι πανομοιότυπη.

⚠ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Στην απίθανη περίπτωση ενσφήνωσης της θηλής στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ιατρό για ασφαλή αφαίρεσή της.

Βήμα 9. Απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας ανοίγοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 9α/9β).

Μοντέλα UP και SP

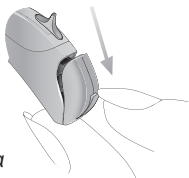

Εικ. 9α

Μοντέλο RIC

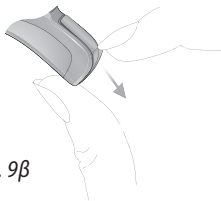

Εικ. 9β

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 10: Αλλαγή της μπαταρίας

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας εκπέμπει διπλό χαρακτηριστικό ήχο, για να υποδείξει ότι θα χρειαστεί σύντομα να αλλάξετε την μπαταρία. Συνήθως έχετε στη διάθεσή σας έως 30 λεπτά για να αλλάξετε την μπαταρία, ωστόσο ο χρόνος μπορεί να ποικίλλει και να είναι σημαντικά μικρότερος. Συνιστάται να έχετε πάντα μαζί σας μια εφεδρική μπαταρία.


- ① **Ιδιαίτερα για τα παιδιατρικά ακουστικά βαρηκοΐας και για όσους φορούν ακουστικά βαρηκοΐας Ultrapower και SuperPower, δεν προτείνεται η χρήση δοκιμαστικού μπαταριών γιατί μπορεί να εμφανίζει τη μπαταρία γεμάτη, ενώ το επίπεδο τάσης να έχει πέσει κάτω από το επίπεδο σωστής λειτουργίας.**

Βήμα 11: Αλλαγή της μπαταρίας σε ακουστικό βαρηκοΐας με μπαταριοθήκη ασφαλείας


Τα μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας **UltraPower** και **SuperPower** μπορούν να έχουν μπαταριοθήκη ασφαλείας αν χρειάζεται για λόγους ασφαλείας

Ανοίξτε τη μπαταριοθήκη σπρώχνοντας τη μύτη του στυλό στην εγκοπή που απεικονίζεται (Εικ. 11α) Σπρώξτε το κούμπωμα προς τα κάτω (Εικ. 11β). Η μπαταριοθήκη μπορεί τώρα να ανοίξει

i Μην ανοίγετε το κούμπωμα περισσότερο από 90°.

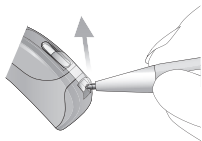


Εικ. 11α

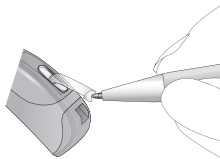

Εικ. 11β


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα και το δείκτη σας για να τραβήξετε τη μπαταριοθήκη και να την ανοίξετε (Εικ. 11γ).

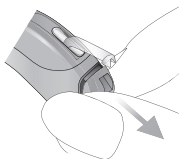

Εικ. 11γ

Τραβήξτε την λευκή πλαστική γλωττίδα με το νύχι σας (Εικ. 11δ) και σπρώξτε προς τα πάνω (Εικ. 11ε). Η μπαταρία μπορεί να τοποθετηθεί μόνο όταν η γλωττίδα είναι ανοιχτή (Εικ. 11ε).

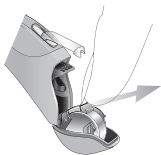

Εικ. 11δ



Εικ. 11ε

Η παλιά μπαταρία μπορεί τώρα να αντικατασταθεί με την καινούργια (Εικ. 11στ).



Εικ. 11στ

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Οδηγήστε την λευκή πλαστική γλωττίδα προς το μέρος της μπαταρίας (Εικ. 11ζ). Πιέστε την για να ασφαλίσετε την μπαταρία με το δάχτυλό σας (Εικ. 11η). Πριν κλείσετε την μπαταριοθήκη, βεβαιωθείτε ότι η λευκή πλαστική γλωττίδα έχει κλείσει και η μπαταρία είναι ασφαλισμένη




Εικ. 11ζ




Εικ. 11η

Ενεργοποιήστε το ακουστικό κλείνοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 11θ).

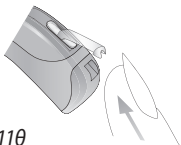


Εικ. 11θ

Ασφαλίστε την μπαταριοθήκη πιέζοντας το κούμπωμα (Εικ. 11i) μέχρι να κουμπώσει στη θέση του (Εικ. 11κ). Ελέγξτε ότι όντως η μπαταριοθήκη έχει κλείσει σωστά.

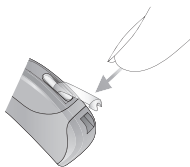

Εικ. 11i

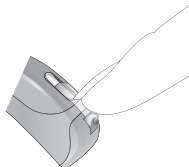

Εικ. 11κ

Βήμα 12: Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο δέκτη Roger


Με τον ενσωματωμένο δέκτη, το ακουστικό προσφέρει όλες τις λειτουργίες και τη χρηστικότητα όπως και χωρίς τον δέκτη.

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

- i** Ο ακοοπροθετιστής σας, έχει ήδη προετοιμάσει το ακουστικό βαρηκοΐας σας για εφαρμογή με ενσωματωμένο δέκτη. Ο δέκτης δεν μπορεί να αφαιρεθεί από εσάς. Ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Το Phonak Naida Q με ενσωματωμένο δέκτη είναι ανθεκτικό στο νερό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες του κελύφους και την αντοχή του σε νερό, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.

- i** Για τα μοντέλα της Phonak Naida Q UP: Όταν ενεργοποιείτε το HI, βεβαιωθείτε ότι η μπαταριοθήκη έχει κλείσει σωστά, όπως φαίνεται στην Εικ. 12. Θα πρέπει να ακούσετε δύο κλικ.

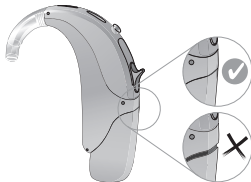

Εικ. 12


Βήμα 13: Σύνδεση του υποδοχέα ήχου στο ακουστικό βαρηκοΐας

Ο ακοοπροθετιστής σας, έχει ήδη προετοιμάσει το ακουστικό βαρηκοΐας σας για εφαρμογή με πανδέκτη.

ⓘ Το Phonak Naida Q δεν είναι πλέον ανθεκτικό στο νερό.

Οι εικόνες 13α – 15β εμφανίζουν την εφαρμογή στα μοντέλα **UltraPower** και **SuperPower**. Ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες για το **μοντέλο RIC**, καθώς η διαδικασία είναι πανομοιότυπη.


Για να συνδέσετε τον υποδοχέα ήχου, κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη με το ένα χέρι και τον υποδοχέα ήχου από την άλλη πλευρά. Πιέστε τον υποδοχέα ήχου προς το κάτω μέρος του ακουστικού βαρηκοΐας. Ταιριάξτε τα αυλάκια του ακουστικού βαρηκοΐας με εκείνα του υποδοχέα ήχου (Εικ. 13α).

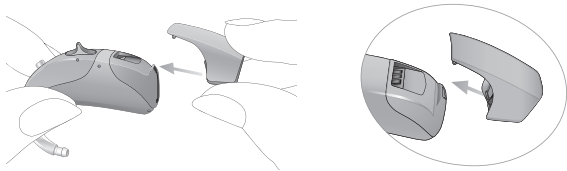

Εικ. 13α

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Πιέστε το υποδοχέα ήχου προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (Εικ. 13β). Ο υποδοχέας ήχου είναι τώρα σωστά συνδεδεμένος με το ακουστικό βαρηκοΐας. Πλέον ένας πανδέκτης μπορεί να συνδεθεί επάνω του.

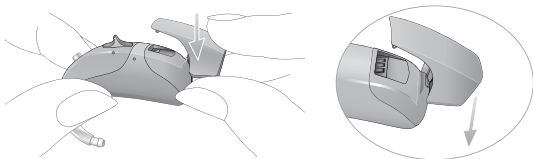


Εικ. 13β

Βήμα 14: Σύνδεση του πανδέκτη στον υποδοχέα ήχου

Συνδέστε το πανδέκτη στον υποδοχέα ήχου πιέζοντας τα τρία καρφιά στις αντίστοιχες υποδοχές. Η πανδέκτης έχει συνδεθεί σωστά με τον υποδοχέα ήχου όταν ακούσετε το κλικ (Εικ. 14α). Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του πανδέκτη.


Εικ. 14α

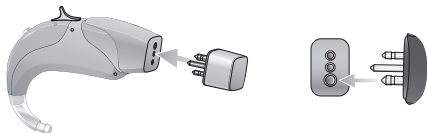

-
- ❶ Για να ακούσετε αμέσως το σήμα μικροφώνου Roger, η Rhonak συνιστά να αφήνετε τον πανδέκτη συνδεδεμένο όταν δεν χρησιμοποιείται.


Βήμα 15: Αφαίρεση του υποδοχέα ήχου από το ακουστικό βαρηκοΐας

Για να αφαιρέσετε τον υποδοχέα ήχου, κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη. Τραβήξτε το σύστημα ασφάλισης που βρίσκεται πίσω από τον υποδοχέα ήχου (Εικ. 15α).

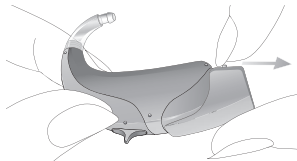

Εικ. 15α

Ταυτόχρονα, τραβήξτε το ακουστικό βαρηκοΐας προς τα πάνω με το άλλο χέρι (εικ. 15β). Ο υποδοχέας ήχου έχει αφαιρεθεί από το ακουστικό βαρηκοΐας.

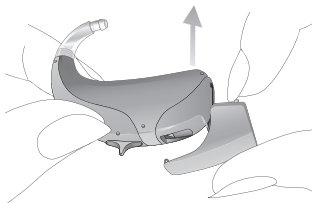

Εικ. 15β

5. Φροντίδα και συντήρηση

Η προσεκτική και τακτική φροντίδα του ακουστικού βαρηκοΐας σας συμβάλλει στην υψηλή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες ως κατευθυντήριες οδηγίες:

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρέι για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, πρέπει να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοΐας από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά μπορεί να του προκαλέσουν ζημιά.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήστε την μπαταριοθήκη ανοιχτή έτσι ώστε να εξατμιστεί η υγρασία. Να στεγνώνετε πάντα το ακουστικό βαρηκοΐας σας μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το σε ένα ασφαλές, στεγνό και καθαρό χώρο.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας είναι ανθεκτικά στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το καπάκι της μπαταριοθήκης πρέπει να είναι εντελώς κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σφηνώσει ξένα σώματα, όπως τρίχες, στο καπάκι της μπαταριοθήκης κατά το κλείσιμό του.

-
- Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, το ακουστικό βαρηκοΐας καθαρίζεται και στεγνώνεται.
 - Το ακουστικό βαρηκοΐας χρησιμοποιείται και συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- ⓘ Τα ακουστικά βαρηκοΐας Naída Q με ενσωματωμένο δέκτη ή μπαταριοθήκη ασφαλείας είναι επίσης αδιάβροχα.
- ⓘ Τα ακουστικά βαρηκοΐας Naída Q με μπαταριοθήκη η οποία επιτρέπει τη χρήση υποδοχέων ήχου και τη σύνδεση με δέκτες, δεν είναι πλέον αδιάβροχα.
- ⓘ Σε περίπτωση χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας στο νερό ενδέχεται να περιοριστεί η ροή αέρα στις μπαταρίες και να πάψει να λειτουργεί. Εάν το ακουστικό βαρηκοΐας πάψει να λειτουργεί μετά από επαφή με νερό, ανατρέξτε στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων στο κεφάλαιο 6.
- ⓘ Ποτέ μην βυθίζετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε νερό ή άλλα υγρά.

5. Φροντίδα και συντήρηση

Καθημερινά

Ελέγχετε εάν υπάρχει κυψελίδα και υγρασία στο εκμαγείο και στο σωλήνα. Καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ.λπ., για τον καθαρισμό του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Δεν συνιστάται να ξεπλένετε τα μέρη αυτά με νερό, υπάρχει κίνδυνος να βουλώσει ο σωλήνας. Εάν απαιτείται εντατικός καθαρισμός του ακουστικού βαρηκοΐας σας, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα ή τις κάψουλες αφύγρανσης.

Εβδομαδιαία

Καθαρίζετε το εκμαγείο (θηλή ή εκμαγείο) με μαλακό, υγρό πανί ή με ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοΐας. Για οδηγίες ενδελεχούς συντήρησης ή καθαρισμού, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας.

Μηνιαία

Ελέγχετε εάν ο ακουστικός σωλήνας έχει αποχρωματιστεί, σκληρύνει ή ραγίσει. Εάν διαπιστωθούν αλλαγές αυτού του τύπου, ο ακουστικός σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ήχος από τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι μικρότερης έντασης από ό,τι συνήθως / δεν υπάρχει ήχος από τα ακουστικά

Αρχικά, ελέγξτε εάν μπορείτε να ρυθμίσετε και να αυξήσετε την ένταση του ήχου με το ρυθμιστή έντασης ήχου. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας αυτιού στον ακουστικό σωλήνα και στο ακουστικό και καθαρίστε τα εξαρτήματα, εάν απαιτείται. Ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί και εάν εφαρμόζει σωστά. Προσαρμόστε τη θέση της, εάν απαιτείται. Εάν δεν βελτιωθεί ο ήχος, αλλάξτε την μπαταρία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Το ακουστικό βαρηκοΐας παύει να λειτουργεί μετά από επαφή με νερό

Ανοίξτε την μπαταριοθήκη, στεγνώστε το εσωτερικό με ένα μαλακό πανί ή χαρτί αφήστε το ακουστικό βαρηκοΐας να στεγνώσει και αντικαταστήστε την μπαταρία. Εάν υπάρχει νερό στον ακουστικό σωλήνα, αφαιρέστε το από το ακουστικό βαρηκοΐας, χτυπήστε το ελαφρά για να φύγει το νερό και επανατοποθετήστε τον στο ακουστικό. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Η μπαταρία αποφορτίζεται υπερβολικά γρήγορα

Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία και σημειώστε τη διάρκεια της με ακρίβεια. Ενημερώστε σχετικά τον ακοοπροθετιστή σας για υποστήριξη και συμβουλές.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τριγμοί ή βόμβος

Ελέγξτε εάν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας αυτιού στον ακουστικό σωλήνα και στο εκμαγείο. Ελέγξτε εάν έχει υποστεί ζημιά ο ακουστικός σωλήνας (αποχρωματισμός, σκλήρυνση ή ρωγμές) και επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

Συριγμοί

Ελέγξτε εάν το εκμαγείο έχει τοποθετηθεί σωστά και εάν εφαρμόζει σταθερά. Εάν το ακουστικό έχει τοποθετηθεί σωστά, αλλά το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Πόνος ή φλεγμονή στο αυτί

Αφαιρέστε το ακουστικό βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας. Εάν το πρόβλημα είναι σοβαρό, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.

7. Συνομιλία σε θόρυβο ή από απόσταση

Όταν βρίσκεστε σε χώρο με πολύ δυνατό θόρυβο, ή προσπαθείτε να ακούσετε από απόσταση, σε μία συζήτηση με έναν ή περισσότερους συνομιλητές μπορεί να είναι δύσκολο - ακόμη και με ένα ακουστικό βαρηκοΐας Phonak Naida Q. Σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις ακρόασης, η πλούσια γκάμα των ασύρματων αξεσουάρ μας μπορεί να σας βοηθήσει.


7.1 Επικοινωνία σε θόρυβο και από απόσταση με το σύστημα Roger

Το Roger είναι η νέα τεχνολογία που γεφυρώνει το χάσμα κατανόησης, μέσω της ασύρματης μετάδοσης της φωνής του ομιλητή απευθείας στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Η σειρά Roger περιλαμβάνει ένα ασύρματο μικρόφωνο, όπως το Roger Pen ή το Roger Clip-On Mic. Το μικρόφωνο Roger τοποθετείται απλά πάνω σε ένα τραπέζι, κρατιέται στο χέρι ή δίδεται στον ομιλητή. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με πηγές ήχου ή μέσω μικροφώνου Roger σε κινητό τηλέφωνο με Bluetooth®.

Το Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

7. Συνομιλία σε θόρυβο ή από απόσταση

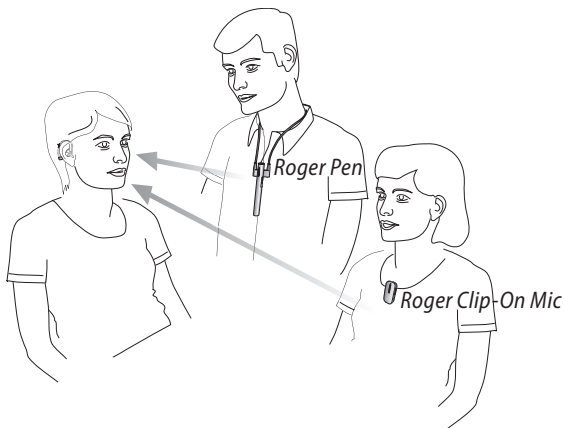

Παραδείγματα όπου μπορείτε να επωφεληθείτε από τα μικρόφωνα Roger

- Οικογενειακές συναντήσεις
- Συνομιλίες σε θόρυβο
- Εστιατόρια και μπαρ
- Συναντήσεις και διαλέξεις
- Τηλεόραση, υπολογιστής, συσκευή αναπαραγωγής Mp3 κτλ.
- Κλήσεις από κινητό τηλέφωνο

Χρειάζεται ένας μικρός δέκτης συνδεδεμένος στο Naida Q για να μπορούν τα μικρόφωνα Roger να μεταφέρουν το σήμα στα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του δέκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία σε θόρυβο ή από απόσταση, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.phonak.com/boost ή από τον ακοοπροθετιστή σας.

7.2 Πραγματοποιώντας κλήση με το Phonak Dect CP1

Το Phonak DECT CP1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο. Η ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία της Phonak κάνει την τηλεφωνική επικοινωνία πολύ ευκολότερη φορώντας ακουστικά βαρηκοΐας Phonak



Το σήμα του τηλεφώνου στέλνεται ασύρματα στα δύο ακουστικά βαρηκοΐας με ψηφιακή ποιότητα.

Όταν πλησιάζετε το ακουστικό του τηλεφώνου προς το αυτί σας, τα ακουστικά βαρηκοΐας θα μεταβούν αυτόματα σε πρόγραμμα τηλεφώνου.

7. Συνομιλία σε θόρυβο ή από απόσταση

7.3 Συνδεσιμότητα με πηγές ήχου και τηλεχειριστήρια

Η σύνδεση με μια πηγή ήχου, όπως MP3 player, τηλεόραση ή κινητό τηλέφωνο μπορεί να γίνει με χρήση ασύρματων αξεσουάρ ήχου.

Ο τηλεχειρισμός των ακουστικών βαρηκοΐας σας μπορεί να γίνει επίσης ασύρματα.

Διαθέσιμα προϊόντα

- Phonak ComPilot (Ασύρματη μετάδοση ήχου και τηλεχειριστήριο σε ένα)
- Phonak PilotOne (Μικρό τηλεχειριστήριο)
- Phonak RemoteMic (Μικρό ασύρματο μικρόφωνο)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ασύρματα αξεσουάρ της Phonak επισκεφθείτε το www.phonak.com/boost ή ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας.

8. Επισκευή και εγγύηση

8.1 Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε το ακουστικό βαρηκοΐας που διαθέτετε.

8.2 Διεθνής εγγύηση

Η Rhonak παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στο ίδιο το ακουστικό, αλλά όχι σε εξαρτήματα όπως μπαταρίες, σωλήνες, εκμαγεία, εξωτερικούς δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

8. Επίσκεψη και εγγύηση

8.3 Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολική καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στο χώρο εργασίας του.

Σειριακός αριθμός
(αριστερή πλευρά):

Εξουσιοδοτημένος
ακοοπροθετιστής
(σφραγίδα / υπογραφή):

Σειριακός αριθμός
(δεξιά πλευρά):

Ημερομηνία αγοράς:

9. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Phonak AG δηλώνει δια του παρόντος ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας περί Ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορεί να ληφθεί από τον κατασκευαστή ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Phonak, τη διεύθυνση του οποίου μπορείτε να βρείτε στο www.phonak.com

Αυστραλία:

Κωδικός Αριθμός Προμηθευτή

 N15398

Νέα Ζηλανδία:

Κωδικός Αριθμός Προμηθευτή

Z1285

9. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Τα ασύρματα μοντέλα που εμφανίζονται στο κεφάλαιο 1, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με:

Μοντέλα UP και SP

Αμερική	FCC ID: KWC-WHSBTE1U
Καναδάς	IC: 2262A-WHSBTE1U

Μοντέλα RIC

Αμερική	FCC ID: KWC-WHSSAN1
Καναδάς	IC: 2262A-WHSSAN1

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτοί πληροί τους κανονισμούς της FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία αυτής της συσκευής υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

- 1) η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει καμία επικίνδυνη ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή και
- 2) η συσκευή αυτή θα πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε εισερχόμενη παρεμβολή συμπεριλαμβανομένης και αυτής της παρεμβολής που πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της.

Σημείωση 2:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις της συσκευής που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Rhonak μπορούν να ακυρώσουν την άδεια της FCC για ορθή λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι πληροί τα όρια για ψηφιακή συσκευή τάξης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν η συσκευή αυτή δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε κάποια δεδομένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί θέτοντας τη συσκευή εκτός λειτουργίας και κατόπιν και πάλι σε λειτουργία, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε κύκλωμα διαφορετικό από το κύκλωμα στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή κάποιον πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Phonak AG επιβεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν της Phonak – συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων – πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ, καθώς και της οδηγίας R&TTE 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο των παραπάνω οδηγιών.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.



Δηλώνει τον ιατρικό κατασκευαστή συσκευής, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 / ΕΟΚ.



Ετικέτα συμμόρφωσης ΗΜΣ
και ραδιοεπικοινωνιών, Αυστραλία.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό για τον χρήστη να διαβάσει και να λάβει υπόψιν του τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για τον χειρισμό και την ασφάλεια των προϊόντων

Συνθήκες λειτουργίας

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Θερμοκρασία: -20° έως $+60^{\circ}$ Κελσίου
(-4° έως $+140^{\circ}$ Φαρενάιτ)



Υγρασία κατά τη μεταφορά:
Έως 90% (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία
κατά την αποθήκευση: 0% έως 70%,
εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Για οδηγίες
σχετικά με το στέγνωμα του ακουστικού
βαρηκοΐας μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο
κεφάλαιο 2.2.



Ατμοσφαιρική πίεση:
200 hPa έως 1500 hPa



Το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτό το ακουστικό βαρηκοΐας δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα κοινά οικιακά απόβλητα. Τα παλιά ή τα μη χρησιμοποιημένα ακουστικά βαρηκοΐας πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται στον ακοοπροθετιστή για απόρριψη. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.
