

Phonak Sky™ V

(V90/V70/V50/V30)

Οδηγίες χρήσης



PHONAK
life is on

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

Ασύρματα μοντέλα

Phonak Sky V90-M

Phonak Sky V90-P

Phonak Sky V90-SP

Phonak Sky V90-UP

Phonak Sky V90-RIC

Phonak Sky V70-M

Phonak Sky V70-P

Phonak Sky V70-SP

Phonak Sky V70-UP

Phonak Sky V70-RIC

Phonak Sky V50-M

Phonak Sky V50-P

Phonak Sky V50-SP

Phonak Sky V50-UP

Phonak Sky V50-RIC

Phonak Sky V30-M

Phonak Sky V30-P

Phonak Sky V30-SP

Phonak Sky V30-UP

Phonak Sky V30-RIC

Επικόλληση σήματος CE

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016



Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας

i Αν δεν είναι επιλεγμένο κανένα πλαίσιο και δεν γνωρίζετε το μοντέλο του ακουστικού βαρηκοΐας σας, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Μοντέλο

<input type="checkbox"/> Sky V-M (V90/V70/V50/V30)	312
<input type="checkbox"/> Sky V-P (V90/V70/V50/V30)	13
<input type="checkbox"/> Sky V-SP (V90/V70/V50/V30)	13
<input type="checkbox"/> Sky V-UP (V90/V70/V50/V30)	675
<input type="checkbox"/> Sky V-RIC (V90/V70/V50/V30)	13

Τύπος μπαταρίας

Εξάρτημα για το αυτί

- Θηλή
- Κλασικό εκμαγείο
- cShell
- SlimTip

Ο ακοοπροθετιστής σας:

┌

└

└

┌

Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας έχουν δημιουργηθεί από τη Phonak, τον παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις για δυσκολίες ακοής με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αυτά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας και εξειδίκευσης και είναι σχεδιασμένα ώστε να σας κρατούν συνδεδεμένους με την ομορφιά του ήχου! Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική επιλογή σας και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια ακουστικής απόλαυσης.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αξιοποιείτε στο έπακρο τα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα, απλώς επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Λήψη της εφαρμογής Phonak Support

Για να έχετε έναν ατομικό και διαδραστικό οδηγό χρήσης πάντα μαζί σας, κάντε λήψη της εφαρμογής Phonak Support στην κινητή συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.phonak.com/supportapp



Πίνακας περιεχομένων

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας

1. Συνοπτικός οδηγός 6
2. Τα μέρη του ακουστικού βαρηκοΐας 8

Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας


3. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας 11
4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 12
5. Μπαταρίες 13
6. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας στο αυτί 17
7. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας 19
8. Κουμπί προγραμμάτων/λυχνία ένδειξης 21
9. Ρυθμιστής έντασης ήχου 23

Επιπλέον πληροφορίες


10. Τεχνολογία Roger™ για συνομιλία σε θόρυβο και από απόσταση 24
11. Χρήση δέκτη Roger 26
12. Άλλα ασύρματα αξεσουάρ 31
13. Φροντίδα και συντήρηση 32
14. Επισκευή και εγγύηση 35
15. Πληροφορίες συμμόρφωσης 37
16. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων 41
17. Αντιμετώπιση προβλημάτων 46
18. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια 49

1. Συνοπτικός οδηγός

Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας

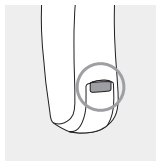

Sky V-M

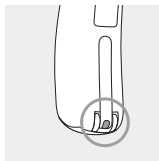


Sky V-P, V-SP, V-UP,
V-RIC

Μπλε ένδειξη για το **αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας**.


Κόκκινη ένδειξη για το **δεξί ακουστικό βαρηκοΐας**.

Αλλαγή μπαταριών

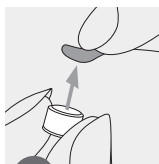


1

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από τη νέα μπαταρία και περιμένετε για δύο λεπτά.

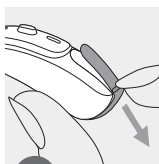

2


Ανοίξτε την μπαταριοθήκη. Για τις ασφαλιζόμενες μπαταριοθήκες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.2.

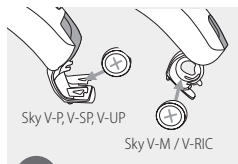


3

Τοποθετήστε την μπαταρία στην μπαταριοθήκη, με το σύμβολο «+» στραμμένο προς τα επάνω.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

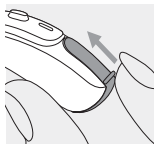


Ενεργοποίηση

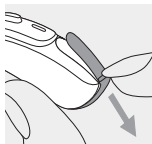

Απενεργοποίηση


Για οδηγίες σχετικά με τις ασφαλιζόμενες μπαταριοθήκες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.2.

Κουμπί προγραμμάτων/λυχνία ένδειξης

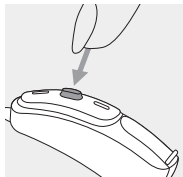

Το κουμπί προγραμμάτων στο ακουστικό βαρηκοΐας σας μπορεί να έχει διάφορες λειτουργίες. Για τη λυχνία ένδειξης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8.

Ρυθμιστής έντασης ήχου

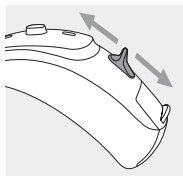

Sky V-P, V-SP, V-UP and V-RIC:


Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα επάνω.
Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω.

2. Τα μέρη του ακουστικού βαρηκοΐας


Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα μοντέλα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε το δικό σας μοντέλο:

- ανατρέχοντας στην παράγραφο «Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας», στη σελίδα 3,
- ή αντιπαραβάλλοντας το ακουστικό βαρηκοΐας σας με τα μοντέλα που απεικονίζονται παρακάτω. Παρατηρήστε προσεκτικά το σχήμα του ακουστικού βαρηκοΐας και αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου.


Πιθανά εξαρτήματα για το αυτί σε διαφορετικά μοντέλα

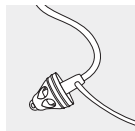

Θηλή Sky V-M/P/RIC

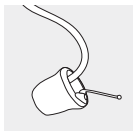

SlimTip Sky V-M/P/RIC

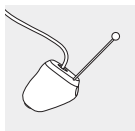

cShell Sky V-RIC




Κλασικό εκμαγείο
Sky V-M/P/SP/UP

Sky V-M*



Sky V-P*, V-SP * και V-UP*

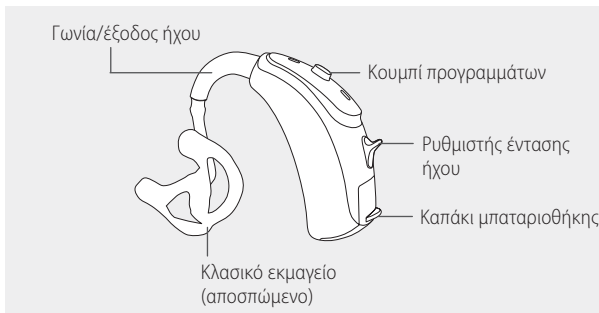

* Διαθέσιμο επίσης με μπαταριοθήκη ασφαλείας για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.2


Sky V-RIC




⚠ Το Sky V-RIC δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

3. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας

Υπάρχει μια κόκκινη ή μπλε ένδειξη που υποδεικνύει αν το ακουστικό βαρηκοΐας προορίζεται για το αριστερό ή για το δεξί αυτί.

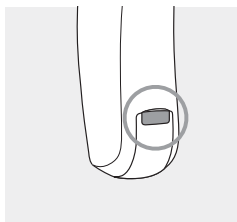

Sky V-M

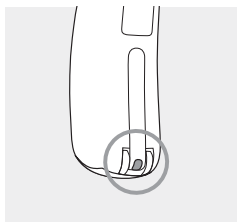

Sky V-P, V-SP, V-UP, V-RIC


Μπλε ένδειξη για το **αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας**.
Κόκκινη ένδειξη για το **δεξί ακουστικό βαρηκοΐας**.

4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Το καπάκι της μπαταριοθήκης είναι επίσης ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να ανοίξετε τις ασφαλιζόμενες μπαταριοθήκες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.2.


1

Κλειστό καπάκι μπαταριοθήκης
= ακουστικό βαρηκοΐας
ενεργοποιημένο

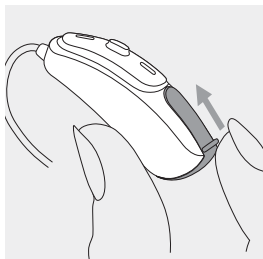

2


Ανοικτό καπάκι
μπαταριοθήκης = ακουστικό
βαρηκοΐας **απενεργοποιημένο**

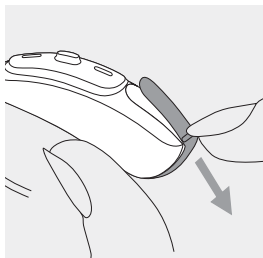

❶ Κατά την ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας σας μπορεί να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα έναρξης.


5. Μπαταρίες

5.1 Τοποθέτηση μπαταρίας (κλασικές μπαταριοθήκες)

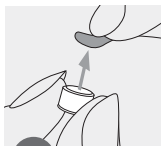


1

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από τη νέα μπαταρία και περιμένετε για δύο λεπτά.

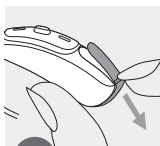

2

Ανοίξτε την μπαταριοθήκη.

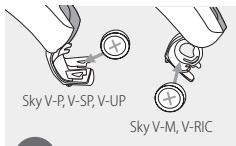

3

Τοποθετήστε την μπαταρία στην μπαταριοθήκη, με το σύμβολο «+» στραμμένο προς τα επάνω.

Αν η μπαταριοθήκη είναι ασφαλιζόμενη, για παιδιά μικρότερης ηλικίας, συνεχίστε διαβάζοντας τις σημαντικές πληροφορίες παρακάτω και ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες του κεφαλαίου 5.2 για την τοποθέτηση της μπαταρίας.

i Αν δυσκολεύεστε να κλείσετε το καπάκι της μπαταριοθήκης: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι το σύμβολο «+» είναι στραμμένο προς τα επάνω. Αν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα λειτουργεί και το καπάκι της μπαταριοθήκης μπορεί να υποστεί ζημιά.



Χαμηλή ισχύς μπαταρίας: Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, ακούγονται δύο χαρακτηριστικοί ήχοι («μπιπ»). Έχετε περίπου 30 λεπτά για να αλλάξετε την μπαταρία (το χρονικό περιθώριο μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του ακουστικού βαρηκοΐας και την μπαταρία). Συνιστούμε να έχετε πάντα μαζί σας μια εφεδρική μπαταρία.

Ανταλλακτική μπαταρία

Αυτό το ακουστικό βαρηκοΐας λειτουργεί με μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα. Προσδιορίστε το σωστό μέγεθος μπαταρίας (312, 13 ή 675):


- ανατρέχοντας στην παράγραφο «Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας», στη σελίδα 3,
- ελέγχοντας την ένδειξη στην εσωτερική πλευρά του καπακιού της μπαταριοθήκης,
- ελέγχοντας τον παρακάτω πίνακα.

Μοντέλο	Μέγεθος μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα	Χρωματική ένδειξη στη συσκευασία	Κωδικός IEC	Κωδικός ANSI
Phonak Sky				
V-M	312	καφέ	PR41	7002ZD
V-P, V-SP, V-RIC	13	πορτοκαλί	PR48	7000ZD
V-UP	675	μπλε	PR44	7003ZD


- ❶ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο μπαταρίας στα ακουστικά βαρηκοΐας σας (ψευδαργύρου-αέρα). Διαβάστε επίσης το κεφάλαιο 18.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος.

5.2 Τοποθέτηση μπαταρίας σε ασφαλιζόμενη μπαταριοθήκη


Όλα τα μοντέλα Sky V (εκτός από το Sky V-RIC) μπορούν να εξοπλιστούν με ασφαλιζόμενη μπαταριοθήκη, αν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφάλειας (παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών). Πριν ξεκινήσετε, διαβάστε τις σημαντικές πληροφορίες στο κεφάλαιο 5.1 σχετικά με τις μπαταρίες.

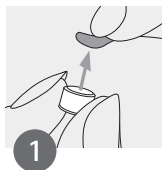

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από τη νέα μπαταρία και περιμένετε για δύο λεπτά.

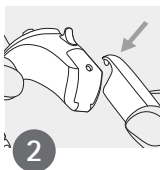


Ανοίξτε την ασφαλιζόμενη μπαταριοθήκη με το ειδικό εργαλείο που παρέχεται από τον ακοοπροθετιστή σας, όπως φαίνεται στις εικόνες 2 και 3, ή χρησιμοποιήστε την άκρη ενός στυλό.

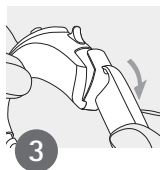


1

Τοποθετήστε την μπαταρία στην μπαταριοθήκη, με το σύμβολο «+» στραμμένο προς τα επάνω.

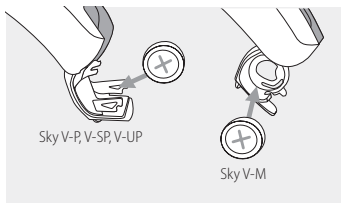

Η μπαταρία είναι ασφαλισμένη μόνο όταν η μπαταριοθήκη έχει κλείσει σωστά. Επιβεβαιώνετε πάντα μετά το κλείσιμο ότι η μπαταριοθήκη δεν μπορεί να ανοίξει με το χέρι.

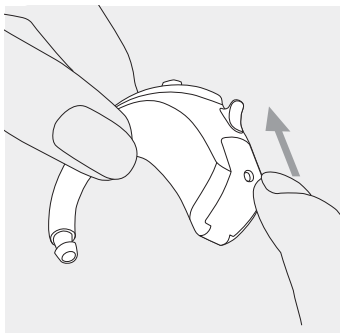


6. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας στο αυτί

6.1 Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας με κλασικό εκμαγείο


1

Φέρετε το εκμαγείο στο αυτί σας και τοποθετήστε το μέρος του ακουστικού πόρου στο εσωτερικό του ακουστικού σας πόρου.

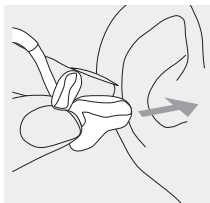


2

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί σας.

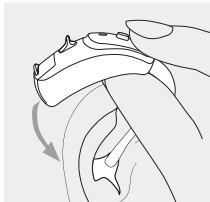

3


Εισάγετε το άνω τμήμα του εκμαγείου στο άνω τμήμα της κοιλότητας του αυτιού σας.

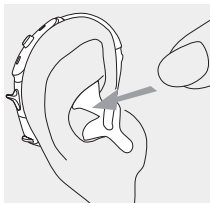

6.2 Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας με θηλή, SlimTip ή cShell


1

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί σας.

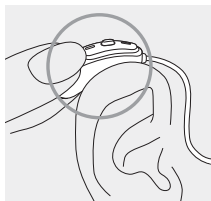


2

Εισάγετε τη θηλή στον ακουστικό πόρο σας.

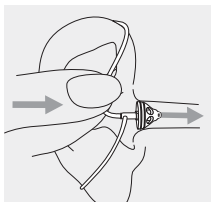

3

Αν η θηλή διαθέτει κορδόνι συγκράτησης, τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα του αυτιού σας για να στερεώσετε με ασφάλεια το ακουστικό βαρηκοΐας.

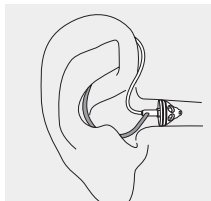


7. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας

7.1 Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας με κλασικό εκμαγείο


1

Ανασηκώστε το ακουστικό βαρηκοΐας πάνω από το άνω τμήμα του αυτιού σας.

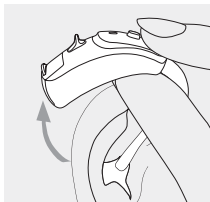

2

Πιάστε το εκμαγείο με τα δάκτυλά σας και αφαιρέστε το προσεκτικά.

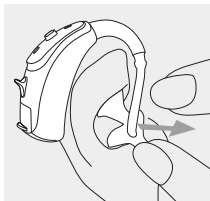


i Αποφύγετε να πιάνετε το σωληνάκι για να αφαιρέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας.

7.2 Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας με θηλή, SlimTip ή cShell

1

Τραβήξτε προσεκτικά το κυρτό τμήμα του σωλήνα και αφαιρέστε το ακουστικό βαρηκοΐας από το πίσω μέρος του αυτιού.

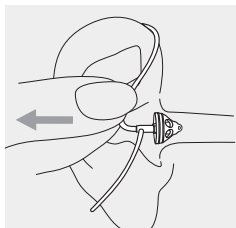

⚠ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας από το αυτί. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, επισκεφθείτε έναν γιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.

8. Κουμπί προγραμμάτων/λυχνία ένδειξης

Το κουμπί προγραμμάτων στο ακουστικό βαρηκοΐας σας μπορεί να έχει διάφορες λειτουργίες ή να είναι ανενεργό. Αυτό εξαρτάται από τον προγραμματισμό που έχει γίνει στο ακουστικό βαρηκοΐας σας, και ο οποίος υποδεικνύεται στις «Οδηγίες ακουστικού βαρηκοΐας» για τη συσκευή σας. Για να τις προμηθευτείτε, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.



Προαιρετική φωτεινή ένδειξη ενσωματωμένη στο κουμπί προγραμμάτων

Οι γονείς και οι φροντιστές βρεφών και μικρών παιδιών μπορούν εύκολα να ενημερωθούν για την κατάσταση του ακουστικού βαρηκοΐας με μια προαιρετική φωτεινή ένδειξη (όλα τα μοντέλα εκτός από το Sky V-RIC). Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη είναι ενσωματωμένη στο κουμπί προγραμμάτων και δείχνει την κατάσταση του ακουστικού βαρηκοΐας όσο είναι

ενεργοποιημένο. Η λυχνία φαίνεται άριστα από την μπροστινή πλευρά. Ο ακοοπροθετιστής σας μπορεί να ενεργοποιήσει/ απενεργοποιήσει τη λυχνία ένδειξης με διάφορους τρόπους. Παρακάτω υπάρχει πλήρης λίστα της κατάστασης του ακουστικού βαρηκοΐας. Ζητήστε από τον ακοοπροθετιστή σας να σημειώσει τις λειτουργίες που έχει ενεργοποιήσει αντίστοιχα.

Κατάσταση ακουστικού βαρηκοΐας

- Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι ενεργοποιημένο
- Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι ενεργοποιημένο και το σύστημα Roger είναι προσβάσιμο
- Χαμηλή ισχύς μπαταρίας *
- Αλλαγή επιπέδου έντασης ήχου (μέσω τηλεχειριστηρίου ή μέσω του κουμπιού προγραμμάτων)
- Αλλαγή προγράμματος (μέσω τηλεχειριστηρίου ή μέσω του κουμπιού προγραμμάτων)

Συμπεριφορά φωτεινής ένδειξης (κίτρινη)

- Επαναλαμβανόμενο μόνο αναβόσβημα ● ● ●
- Επαναλαμβανόμενο διπλό αναβόσβημα ●● ●● ●●
- Επαναλαμβανόμενο τριπλό αναβόσβημα ●●● ●●● ●●●
- Μονό αναβόσβημα σε κάθε αλλαγή της έντασης ήχου ●
- Μονό αναβόσβημα σε κάθε αλλαγή προγράμματος ●

* Η χαμηλή ισχύς μπαταρίας υποδεικνύεται περίπου 30 λεπτά πριν χρειαστεί να αντικατασταθεί η μπαταρία. Συνιστάται να έχετε πάντα εύκαιρη μια νέα μπαταρία.


9. Ρυθμιστής έντασης ήχου

Μόνο στα μοντέλα Sky V-P, V-SP, V-UP και V-RIC:

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα επάνω.

Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω.

Ο ρυθμιστής έντασης ήχου μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον ακοοπροθετιστή.

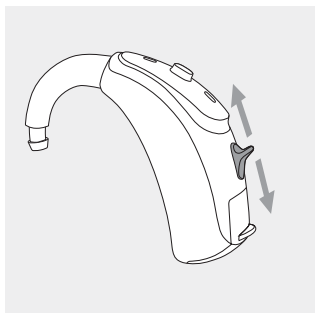

10. Τεχνολογία Roger™ για συνομιλία σε θόρυβο και από απόσταση


Τα εξαρτήματα Roger διευκολύνουν την επικοινωνία από απόσταση και σε θορυβώδη περιβάλλοντα, αποστέλλοντας ασύρματα τη φωνή του ομιλητή απευθείας στα ακουστικά βαρηκοΐας. Τα συστήματα Roger περιλαμβάνουν μικρόφωνο και δέκτη. Ορισμένα μικρόφωνα Roger υποστηρίζουν επίσης είσοδο από πηγές ήχου μέσω Bluetooth® ή καλωδίου.

Μικρόφωνο: Φοριέται ή τοποθετείται κοντά στον ομιλητή, ή συνδέεται στην πηγή ήχου και μεταδίδει τον ήχο απευθείας στο δέκτη σας, χωρίς ενοχλητικούς περιβαλλοντικούς ήχους.

Δέκτης: Προσαρτάται στα ακουστικά βαρηκοΐας και φοριέται πίσω από το αυτί ή στο σώμα σας, με neckloop (κορδόνι για το λαιμό).

Ο συνδυασμός των ακουστικών βαρηκοΐας Phonak Sky V με ένα ασύρματο μικρόφωνο Roger σας επιτρέπει να ακούτε και να κατανοείτε μεγαλύτερο ποσοστό ομιλίας υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

www.phonak.com/roger

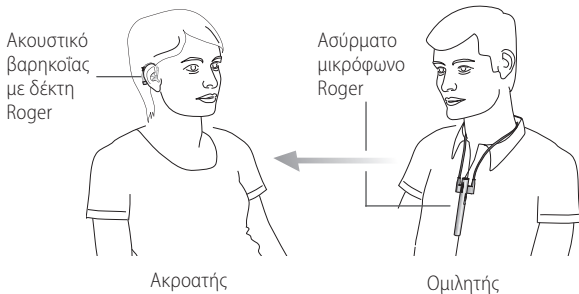


Ζητήστε από τον ακοοπροθετιστή σας μια επίδειξη της τεχνολογίας Roger και περισσότερες πληροφορίες.

11. Χρήση δέκτη Roger

11.1 Δέκτης Roger με ενσωματωμένο audio shoe

Τα Phonak Sky V-P/V-SP/V-UP/V-RIC μπορούν να εξοπλιστούν με δέκτη Roger ενσωματωμένο με audio shoe

Με προσαρτημένο τον ενσωματωμένο δέκτη με audio shoe, το ακουστικό βαρηκοΐας λειτουργεί κανονικά όπως και χωρίς το δέκτη. Το ακουστικό βαρηκοΐας με τον ενσωματωμένο με audio shoe δέκτη είναι ανθεκτικό στο νερό. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 13.

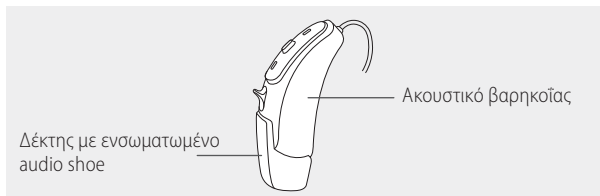

⚠ Ο ακοοπροθετιστής έχει ήδη προετοιμάσει το ακουστικό βαρηκοΐας σας για χρήση με τον ενσωματωμένο βάσει σχεδιασμού δέκτη και αυτό το μέρος δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

11.2 Audio Shoe και δέκτης Roger X




Με το audio shoe και το δέκτη Roger X συνδεδεμένο, το ακουστικό βαρηκοΐας λειτουργεί κανονικά όπως και χωρίς το δέκτη, με μία σημαντική διαφορά:

⚠ Το ακουστικό βαρηκοΐας σας με audio shoe δεν είναι πλέον ανθεκτικό στο νερό.

Εφαρμογή audio shoe


1

Πιέστε το audio shoe προς τη βάση του ακουστικού βαρηκοΐας. Αντιστοιχίστε τις εγκοπές που υπάρχουν στα δύο μέρη.

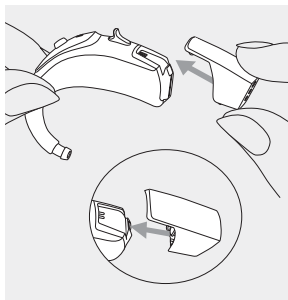

2


Πιέστε έως ότου κουμπώσει στη θέση του και προσαρτηθεί σωστά στο ακουστικό βαρηκοΐας. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να προσαρτήσετε το δέκτη Roger X.

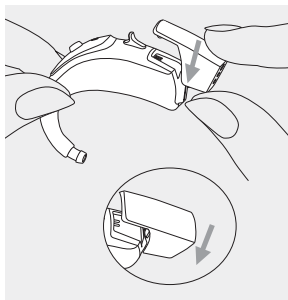

Προσάρτηση του δέκτη Roger X

1

Πιέστε τις τρεις ακίδες του δέκτη Roger X στις τρεις οπές του audio shoe. Ο δέκτης Roger X είναι σωστά προσαρτημένος όταν ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.

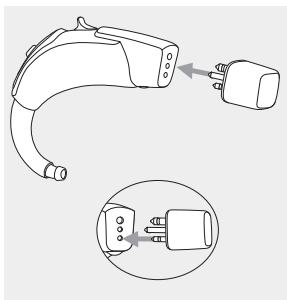

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου δέκτη.




Για να ακούτε αμέσως το σήμα του μικροφώνου Roger, η Phonak συνιστά να αφήνετε το δέκτη Roger X προσαρτημένο στο ακουστικό βαρηκοΐας ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αφαίρεση της διάταξης υποδοχής ήχου


1

Κρατήστε τον ακουστικό βαρηκοΐας ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη. Μετακινήστε προς τα πίσω το σύστημα ασφάλισης της διάταξης υποδοχής ήχου.

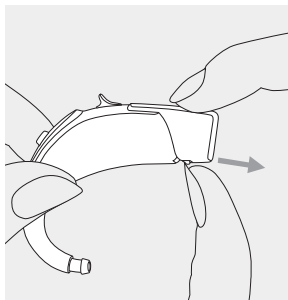


2

Τραβήξτε τη διάταξη υποδοχής ήχου προς τα επάνω με το άλλο χέρι. Η διάταξη υποδοχής ήχου έχει πλέον αφαιρεθεί από το ακουστικό βαρηκοΐας.

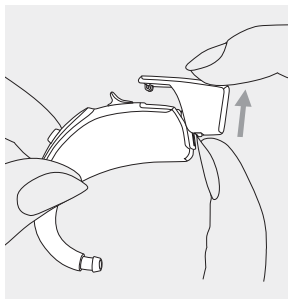

12. Άλλα ασύρματα αξεσουάρ

Η Phonak διαθέτει μια ποικιλία αξεσουάρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

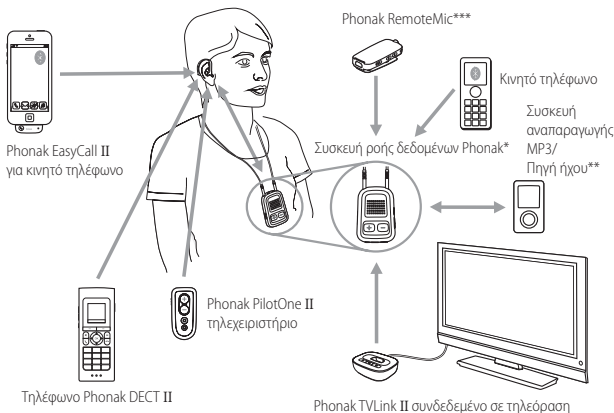

* Phonak ComPilot II με neckloop (κορδόνι για το λαιμό) ή ComPilot Air II με κλιπ στερέωσης στα ρούχα. Διαθέτουν επίσης βασικές λειτουργίες τηλεχειρισμού. Για προηγμένο έλεγχο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την εφαρμογή Phonak RemoteControl.

** Οι πηγές ήχου (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής MP3, υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet) μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή ροής δεδομένων μέσω Bluetooth ή καλωδίου ήχου.

*** Στερεωμένο με κλιπ στα ρούχα του ομιλητή για καλύτερη κατανόηση από απόσταση.

13. Φροντίδα και συντήρηση

Η προσεκτική και τακτική φροντίδα του ακουστικού βαρηκοϊας σας συμβάλλει στην υψηλή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες ως κατευθυντήριες οδηγίες.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 18.2.

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρί για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοϊας από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο ακουστικό.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοϊας σας, αφήνετε το καπάκι της μπαταριοθήκης ανοικτό, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοϊας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοϊας σε ασφαλές, στεγνό και καθαρό μέρος.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ανθεκτικά στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Το καπάκι της μπαταριοθήκης είναι τελείως κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σφηνώσει ξένα σώματα, όπως τρίχες, στο καπάκι της μπαταριοθήκης κατά το κλείσιμό του.
- Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται.
- Το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

- ❶ Τα ακουστικά βαρηκοΐας με ενσωματωμένο με audio shoe δέκτη Roger είναι επίσης ανθεκτικά στο νερό.
- ❶ Τα ακουστικά βαρηκοΐας με audio shoe και δέκτη Roger X δεν είναι ανθεκτικά στο νερό.
- ❶ Σε περίπτωση χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας κοντά σε νερό ενδέχεται να περιοριστεί η ροή αέρα στις μπαταρίες, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία του. Αν το ακουστικό βαρηκοΐας πάψει να λειτουργεί μετά από επαφή με νερό, ανατρέξτε στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, στο κεφάλαιο 17.

Καθημερινά

Ελέγχετε αν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας και υγρασίας στο ακουστικό και στο σωληνάκι. Καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι ή χρησιμοποιείτε τη μικρή βούρτσα που περιλαμβάνεται στη θήκη του ακουστικού βαρηκοΐας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ. λπ. , για τον καθαρισμό του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Το ξέπλυμα των εξαρτημάτων αυτών με νερό δεν συνιστάται, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραμονής του στο σωληνάκι. Αν απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός του ακουστικού βαρηκοΐας σας, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα ή τις κάψουλες αφύγρανσης.

Εβδομαδιαία

Καθαρίζετε το εξάρτημα για το αυτί με ένα μαλακό, υγρό πανί ή με ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοΐας. Για περισσότερες οδηγίες συντήρησης ή καθαρισμού, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας.

Μηνιαία

Ελέγχετε αν το ακουστικό σωληνάκι έχει αποχρωματιστεί, σκληρύνει ή ραγίσει. Αν διαπιστωθούν μεταβολές αυτού του τύπου, το ακουστικό σωληνάκι πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

14. Επίσκεψη και εγγύηση

Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Διεθνής εγγύηση

Η Rhonak παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς.

Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στο ίδιο το ακουστικό, αλλά όχι σε εξαρτήματα όπως μπαταρίες, σωλήνες, εκμαγεία, εξωτερικοί δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολικής καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει τυχόν επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στο χώρο εργασίας του.

Σειριακός αριθμός
(αριστερή πλευρά):

Εξουσιοδοτημένος
ακοοπροθετιστής
(σφραγίδα/υπογραφή):

Σειριακός αριθμός
(δεξιά πλευρά):

Ημερομηνία αγοράς:

15. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Phonak AG δηλώνει διά του παρόντος ότι το συγκεκριμένο προϊόν της Phonak πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Phonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται σε λίστα στον ιστότοπο www.phonak.com (Phonak worldwide locations – Αντιπροσωπείες της Phonak σε ολόκληρο τον κόσμο).

Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία:



R-NZ

Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM – Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA – Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις εν λόγω χώρες. Η ετικέτα συμμόρφωσης R-NZ προορίζεται για ραδιοπροϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας υπό το επίπεδο συμμόρφωσης A1.

Τα ασύρματα μοντέλα που αναφέρονται στη σελίδα 2 είναι πιστοποιημένα βάσει των παρακάτω:

Phonak Sky V-M (V90/V70/V50/V30)

ΗΠΑ	Αρ. αναγνώρισης FCC: KWC-WHSBTEM
Καναδάς	IC: 2262A-WHSBTEM

Phonak Sky V-P (V90/V70/V50/V30)

ΗΠΑ	Αρ. αναγνώρισης FCC: KWC-WHSBTEP
Καναδάς	IC: 2262A-WHSBTEP

Phonak Sky V-SP (V90/V70/V50/V30)

ΗΠΑ	Αρ. αναγνώρισης FCC: KWC-BTEVSP
Καναδάς	IC: 2262A-BTEVSP

Phonak Sky V-UP (V90/V70/V50/V30)

ΗΠΑ	Αρ. αναγνώρισης FCC: KWC-BTEVUP
Καναδάς	IC: 2262A-BTEVUP

Phonak Sky V-RIC (V90/V70/V50/V30)

ΗΠΑ	Αρ. αναγνώρισης FCC: KWC-WHSRIC4
Καναδάς	IC: 2262A-WHSRIC4

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση 2:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Phonak μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της άδειας χειρισμού της συσκευής αυτής βάσει των κανονισμών FCC.

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά.

Τα όρια αυτά προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για υποστήριξη.

16. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Phonak AG επιβεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν της Phonak –συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων– πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (ΡΤΤΕ). Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο των παραπάνω οδηγιών.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β του προτύπου EN 60601–1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.



Υποδεικνύει τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, όπως ορίζεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για το χειρισμό και την ασφάλεια του προϊόντος.



Κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διατηρείτε το προϊόν στεγνό.

Συνθήκες λειτουργίας Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Τα ακουστικά βαρηκοΐας έχουν ταξινομηθεί ως IP68 (βάθος 1 μέτρου για 60 λεπτά) και σχεδιαστεί για χρήση σε όλες τις καθημερινές καταστάσεις της ζωής. Επομένως, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν τα ακουστικά βαρηκοΐας σας εκτεθούν σε ψιλόβροχο ή ιδρώτα. Ωστόσο, το ακουστικό βαρηκοΐας δεν ενδείκνυται για χρήση σε δραστηριότητες με νερό που περιλαμβάνουν χλωριωμένο νερό, σαπούνι, αλμυρό νερό ή άλλα υγρά με χημικό περιεχόμενο.

SN

Υποδεικνύει το σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας συγκεκριμένης ιατρικής συσκευής.

REF

Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας συγκεκριμένης ιατρικής συσκευής.



Θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση:
-20° έως +60° Κελσίου (-4° έως +140° Φαρενάιτ).



Υγρασία κατά τη μεταφορά: Έως 90%
(χωρίς συμπύκνωση).

Υγρασία κατά την αποθήκευση: 0% έως 70%,
εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Για οδηγίες σχετικά
με την αφύγρανση του ακουστικού βαρηκοΐας
μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο 18.2.



Ατμοσφαιρική πίεση: 200 hPA έως 1500 hPA



Το σύμβολο με το διαγεγραμμένο κάδο
απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτό το ακουστικό
βαρηκοΐας δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως
τα κοινά οικιακά απόβλητα. Τα παλιά ή τα
μη χρησιμοποιημένα ακουστικά βαρηκοΐας
πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης
ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται
στον ακοοπροθετιστή για απόρριψη. Η σωστή
απόρριψη συμβάλλει στην προστασία
του περιβάλλοντος και της υγείας.

17. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν λειτουργεί

Ακούγονται συριγμοί από το ακουστικό βαρηκοΐας

Η ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοΐας δεν είναι αρκετά υψηλή ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος

Το ακουστικό βαρηκοΐας εκπέμπει δύο χαρακτηριστικούς ήχους

Το ακουστικό βαρηκοΐας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται (μη συνεχής λειτουργία)

Η φωτεινή ένδειξη δεν αναβοσβήνει

Αιτίες

Εξαντλημένη μπαταρία

Βουλωμένο megάφωνο / θηλή

Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

Απενεργοποιημένο ακουστικό βαρηκοΐας

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

Υπολείμματα κυψελίδας στον ακουστικό πόρο

Υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας

Βουλωμένο megάφωνο / θηλή

Υπερβολικά χαμηλή ένταση ήχου

Μεταβολή της φυσικής κατάστασης της ακοής

Ένδειξη για χαμηλή ισχύ μπαταρίας

Υγρασία στην μπαταρία ή στο ακουστικό βαρηκοΐας

Εξαντλημένη μπαταρία

Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

Η φωτεινή ένδειξη δεν ενεργοποιείται

i Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας για βοήθεια

Τι να κάνετε

Αλλάξτε μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)

Καθαρίστε την είσοδο του μικροφώνου / θηλή

Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)

Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας κλείνοντας εντελώς το καπάκι της μπαταριοθήκης (κεφάλαιο 4)

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 6)

Επικοινωνήστε με ωτορινολαρυγγολόγο/γενικό ιατρό ή τον ακοοπροθετιστή σας

Μειώστε την ένταση του ήχου (κεφάλαια 8 + 9)

Αλλάξτε μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)

Καθαρίστε την είσοδο του μικροφώνου / θηλή

Αυξήστε την ένταση του ήχου, αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου (κεφάλαια 8 + 9)

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

Αλλάξτε μπαταρία στα επόμενα 30 λεπτά (κεφάλαια 1 + 5)

Σκουπίστε την μπαταρία και το ακουστικό βαρηκοΐας με ένα στεγνό πανί

Αλλάξτε μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)

Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)





Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας


18. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια


Διαβάστε τις πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.


Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν αποτρέπει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεανάγνωση.


18.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου


-  Τα ακουστικά βαρηκοΐας προορίζονται για ενίσχυση και μετάδοση ήχου στα αυτιά, σε περιπτώσεις όπου η ακοή είναι περιορισμένη. Τα ακουστικά βαρηκοΐας (προγραμματισμένα ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε άλλο άτομο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.
-  Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο ακουστικό βαρηκοΐας αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Rhonak. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.
-  Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, περιβάλλοντα πλούσια σε οξυγόνο ή χώροι στους οποίους γίνεται χειρισμός εύφλεκτων αναισθητικών).
-  Οι μπαταρίες του ακουστικού βαρηκοΐας είναι τοξικές σε περίπτωση κατάποσης! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση ή κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης των μπαταριών, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό!

 Για την αποφυγή ακούσιας κατάποσης της μπαταρίας ή εξαρτημάτων μικρού μεγέθους της συσκευής, σε περίπτωση χρήσης από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 36 μηνών, απαιτείται η χρήση ειδικών προφυλάξεων για την μπαταριοθήκη, το άγκιστρο για το αυτί και τον ενσωματωμένο με audio shoe δέκτη Roger (εφόσον χρησιμοποιείται). Αν υποστεί ζημιά κάποιους από αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας, λόγω εφαρμογής υπερβολικής δύναμης ή χρήσης μη κατάλληλου εργαλείου, πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή στον ακοοπροθετιστή σας για επισκευή ή αλλαγή.


 Αν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί, αν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος και ταχεία συσσώρευση κυψελίδας αυτιού, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας.


 Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, επισκεφθείτε έναν ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.

 Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι τα προειδοποιητικά σήματα ή οι ήχοι που προέρχονται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή εν μέρει.

 Το μοντέλο Phonak Sky V-RIC δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών. Περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό σε περίπτωση κατάποσης από παιδιά. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση ή κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης,

απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό ή μεταβείτε σε νοσοκομείο.


 Μην συνδέετε ενσύρματα το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε οποιαδήποτε εξωτερική πηγή ήχου, όπως ραδιόφωνο κ. λπ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό (ηλεκτροπληξία).

 Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για άτομα με ενεργές εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές κ.λπ.):

- Διατηρείτε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα. Αν προκύψουν παρεμβολές, μην χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά

βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού εμφυτεύματος. Λάβετε υπόψη ότι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ.λπ.

- Τυχόν μαγνήτες (π.χ. εργαλείο για μπαταρίες, μαγνήτης EasyPhone κ.λπ.) πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα.

 Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να τοποθετούνται με θηλές/συστήματα προστασίας από κυψελίδα όταν χρησιμοποιούνται από πελάτες με διάτρηση τυμπάνου, φλεγμονή

του ακουστικού πόρου ή παρεμφερή κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε τη χρήση ενός προσαρμοσμένου εκμαγείου. Στην απίθανη περίπτωση παραμονής οποιουδήποτε μέρους αυτού του προϊόντος στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ειδικό ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.

18.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος

- ❶ Τα ακουστικά βαρηκοΐας της Phonak είναι ανθεκτικά στο νερό αλλά δεν είναι αδιάβροχα. Είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν την καταπόνηση που προκαλείται κατά τις τυπικές δραστηριότητες και την περιστασιακή, ακούσια έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Μην βυθίζετε ποτέ το ακουστικό βαρηκοΐας σε νερό! Τα ακουστικά βαρηκοΐας της Phonak δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για τακτική εμβάπτιση σε νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά την κολύμβηση ή όταν κάνετε μπάνιο. Αφαιρείτε πάντα το ακουστικό βαρηκοΐας πριν από αυτές τις δραστηριότητες, καθώς το ακουστικό περιλαμβάνει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ❶ Μην πλένετε ποτέ τις εισόδους του μικροφώνου. Μπορεί να χάσει τις ειδικές ακουστικές του ιδιότητες.
- ❶ Προστατεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη θερμότητα (μην το αφήνετε ποτέ κοντά σε παράθυρο ή στο αυτοκίνητο). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Για τις ενδεδειγμένες μεθόδους αφύγρανσης, ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας.

- ❶ Η θηλή θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις μήνες ή όταν γίνεται άκαμπτη. Με τον τρόπο αυτόν προλαμβάνεται η απόσπαση της θηλής από το στέλεχος του σωλήνα κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση από το αυτί.
- ❷ Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήνετε το καλάκι της μπαταριοθήκης ανοικτό, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλές, στεγνό και καθαρό μέρος.
- ❸ Προφυλάσσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας από πτώσεις! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.
- ❹ Χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Σε περίπτωση που μια μπαταρία εμφανίσει διαρροή, αντικαταστήστε την αμέσως με μια καινούργια για την αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Μπορείτε να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον ακοοπροθετιστή σας.

- ❶ Η τάση των μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5 Volt. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αργύρου-ψευδαργύρου ή μπαταρίες Li-ion (ιόντων λιθίου), καθώς οι μπαταρίες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ο πίνακας στο κεφάλαιο 5 εξηγεί ακριβώς ποιος τύπος μπαταρίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα συγκεκριμένα ακουστικά βαρηκοΐας σας.
- ❶ Αφαιρείτε την μπαταρία, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ❶ Η λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να επηρεαστεί από ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφαιρείτε και φυλάσσετε τα εκτός της αίθουσας/ του χώρου εξέτασης, πριν υποβληθείτε σε:
- Ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτίνες Χ (και σαρώσεις CT).

- Ιατρικές εξετάσεις με σαρώσεις MRI/NMRI, κατά τις οποίες δημιουργούνται μαγνητικά πεδία.
- Κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (σε αεροδρόμια κ. λπ.) δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, εφαρμόζεται εξαιρετικά χαμηλή δόση που δεν επηρεάζει τα ακουστικά βαρηκοΐας.

ⓘ Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Κατασκευαστής:
Phonak AG

Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland

για την Ελλάδα:
www.phonak-hellas.com

www.phonak.com

CE
0459

