

Phonak CROS P

Οδηγίες Χρήσης



Phonak CROS P-R



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης ισχύουν για:

Μοντέλο συσκευής CROS

Phonak CROS P-R

Επικόλληση σήματος CE:
2021

Μη ασύρματα αξεσουάρ φόρτισης

Phonak Charger Case Combi	2018
Phonak Charger BTE RIC	2019
Phonak Mini Charger Case	2018
Phonak Power Pack	2016

CE
0459



Λεπτομέρειες για το σύστημα CROS και τον φορτιστή σας

- ❶ Αν δεν είναι επιλεγμένο κανένα πλαίσιο και δεν γνωρίζετε το μοντέλο της συσκευής CROS ή των αξεσουάρ φόρτισης που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.
- ❶ Η συσκευή CROS που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ❶ Το Power Pack περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου.
- ❶ Διαβάστε επίσης τις πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τον χειρισμό της επαναφορτιζόμενης συσκευής CROS (κεφάλαιο 22).

Μοντέλο συσκευής CROS

CROS P-R

Ακροφύσια

Θηλή

SlimTip

Άκρο CROS

Αξεσουάρ φόρτισης

Charger Case Combi*

Charger BTE RIC*

Mini Charger Case*

Power Pack

* Συμπ. τροφοδοτικού και καλωδίου USB (< 3 m)

Η συσκευή CROS και οι φορτιστές σας έχουν κατασκευαστεί από τη Phonak, τον παγκόσμιο ηγέτη στις ακουστικές λύσεις με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αυτά τα premium προϊόντα είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας και εξειδίκευσης, σχεδιασμένα ώστε να σας κρατούν συνδεδεμένους με την ομορφιά του ήχου! Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική επιλογή σας και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια ακουστικής απόλαυσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αξιοποιείτε στο έπακρο τη συσκευή CROS που διαθέτετε.

Δεν απαιτείται εκπαίδευση για τον χειρισμό αυτής της συσκευής.

Ένας ακοοπροθετιστής θα ρυθμίσει αυτήν τη συσκευή CROS σύμφωνα με τις εξατομικευμένες προτιμήσεις σας κατά την επίσκεψη τοποθέτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, ρύθμιση, χρήση και συντήρηση ή επισκευή της συσκευής CROS και των αξεσουάρ σας, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας ή με τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο δεδομένων του προϊόντος σας.

Phonak - life is on
www.phonak.com

Περιεχόμενα

Η συσκευή CROS και ο φορτιστής σας

- | | |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Συνοπτικός οδηγός | 8 |
| 2. Εξαρτήματα της συσκευής CROS και του φορτιστή σας | 10 |
| 3. Προετοιμασία του φορτιστή | 15 |

Χρήση του φορτιστή

- | | |
|-------------------------------------------------|----|
| 4. Φόρτιση του συστήματος CROS | 16 |
| 5. Ενδείξεις αριστερής και δεξιάς συσκευής CROS | 25 |

Χρήση της συσκευής CROS

- | | |
|------------------------------------|----|
| 6. Τοποθέτηση της συσκευής CROS | 26 |
| 7. Αφαίρεση της συσκευής CROS | 27 |
| 8. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών | 28 |
| 9. Επισκόπηση συνδεσιμότητας | 29 |
| 10. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση | 30 |
| 11. Tap control | 31 |
| 12. Αρχική σύζευξη | 32 |
| 13. Τηλεφωνικές κλήσεις | 34 |
| 14. Λειτουργία πτήσης | 39 |
| 15. Επανεκκίνηση της συσκευής CROS | 42 |

Περισσότερες πληροφορίες


16.	Συνθήκες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης	43
17.	Φροντίδα και συντήρηση	45
18.	Αντικατάσταση του ακροφύσιου από τον ακουστικό σωλήνα	48
19.	Επισκευή και εγγύηση	50
20.	Πληροφορίες συμμόρφωσης	52
21.	Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων	60
22.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	66
23.	Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	70

1. Συνοπτικός οδηγός

Φόρτιση της συσκευής CROS

- ❶ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή CROS για πρώτη φορά, συνιστάται να τη φορτίσετε για 3 ώρες.


Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή CROS στον φορτιστή, η ενδεικτική λυχνία θα υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας έως ότου η συσκευή CROS φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει συνεχώς αναμμένη, δηλ. με σταθερό πράσινο φως.

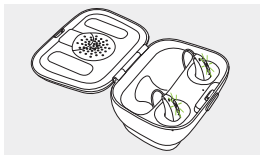

Ενδείξεις αριστερής και δεξιάς συσκευής CROS

Μπλε ένδειξη για την αριστερή συσκευή.

Κόκκινη ένδειξη για τη δεξιά συσκευή.

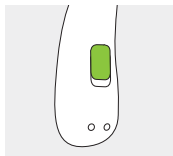

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών με ενδεικτική λυχνία

Το κουμπί διαθέτει αρκετές λειτουργίες.

Λειτουργεί ως διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, ως ρυθμιστής έντασης ήχου αν δεν υπάρχει ασύρματη μετάδοση ήχου από τη συσκευή CROS προς το ακουστικό βαρηκοΐας, ελέγχει την ισοστάθμιση όταν υπάρχει ασύρματη μετάδοση ήχου από τη συσκευή CROS προς το ακουστικό βαρηκοΐας ή/και αλλάζει το πρόγραμμα ανάλογα με τον προγραμματισμό του ακουστικού βαρηκοΐας. Αυτό επισημαίνεται στις εξατομικευμένες οδηγίες που σας έχουν δοθεί.



Τηλεφωνικές κλήσεις: Εάν πραγματοποιηθεί σύζευξη με τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth, με ένα σύντομο πάτημα θα γίνεται αποδοχή και με ένα παρατεταμένο πάτημα θα γίνεται απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε σταθερά το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία.

Ενεργοποίηση: η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα

Απενεργοποίηση: η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα

Θέση σε λειτουργία πτήσης: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κάτω μέρος του κουμπιού για 7 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί σταθερά αναμμένη η πορτοκαλί λυχνία. Έπειτα αφήστε το κουμπί.

2. Εξαρτήματα της συσκευής CROS και του φορτιστή σας


Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα αξεσουάρ του μοντέλου της συσκευής CROS και του φορτιστή που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε τα δικά σας μοντέλα ανατρέχοντας στην παράγραφο «Λεπτομέρειες για τη συσκευή CROS και τον φορτιστή σας» στη σελίδα 3.

Η συσκευή CROS της Phonak είναι μια εφαρμογή για μονόπλευρη απώλεια ακοής χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης. Τοποθετείται στο αυτί που παρουσιάζει το πρόβλημα ακοής και μεταδίδει ασύρματα ήχο στο ακουστικό βαρηκοΐας Phonak που βρίσκεται στο άλλο αυτί.


Συσκευή Phonak CROS P + Ακουστικό βαρηκοΐας Phonak = Σύστημα Phonak CROS

i Η συσκευή Phonak CROS P λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με ακουστικό βαρηκοΐας Phonak Audéo™ P ως δέκτη

Διαθέσιμα ακροφύσια

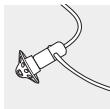

Θηλή

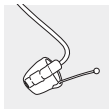

Ακροφύσιο Slim




Ακροφύσιο CROS

CROS P-R

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία

Ακουστικός
σωλήνας

Στοιχείο συγκράτησης
(προαιρετικό)

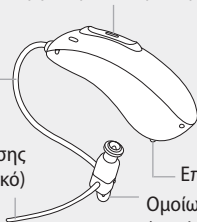


Επαφές φόρτισης

Ομοίωμα ηχείου
(χωρίς προσαρτημένο
ακροφύσιο)



Charger Case Combi




Χώρος για κάψουλα αφύγρανσης (ανοικτό κάλυμμα)

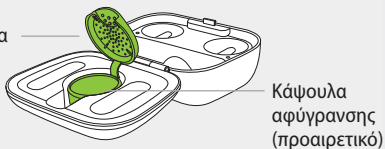


Charger Case Combi με προαιρετικό Power Pack

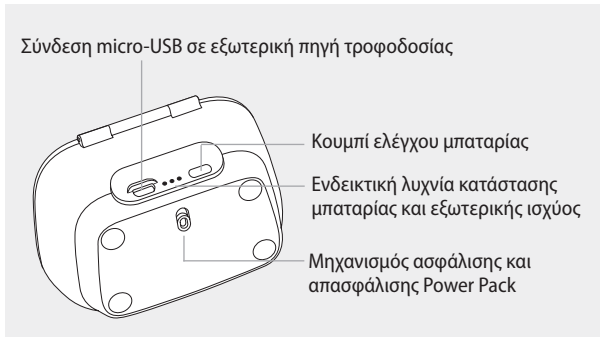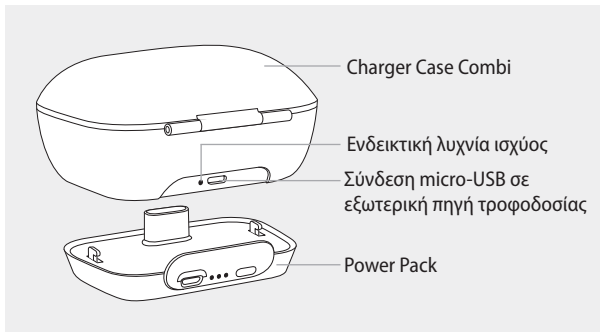

Mini Charger Case

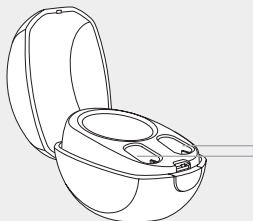


Θέσεις φόρτισης συστήματος CROS
με ενδείξεις δεξιά/αριστερά

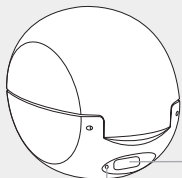


Σύνδεση USB-C
σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
Ενδεικτική λυχνία ισχύος

Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

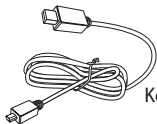



Καλώδιο USB (< 3 m)

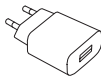

Τροφοδοτικό

3. Προετοιμασία του φορτιστή

Σύνδεση του τροφοδοτικού

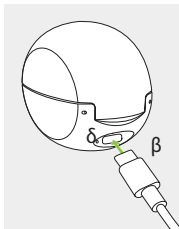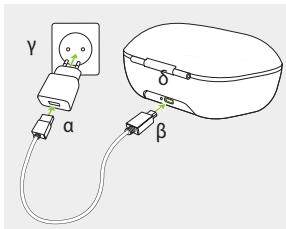

- α) Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου φόρτισης στο τροφοδοτικό.
- β) Συνδέστε το μικρότερο άκρο στη θύρα USB του φορτιστή.
- γ) Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα.
- δ) Η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό.

Προδιαγραφές τροφοδοτικού

Τάση εισόδου τροφοδοτικού	100-240 VAC, 50/60 Hz, ρεύμα 0,25 A
Τάση εξόδου τροφοδοτικού	5 VDC +/-10%, ρεύμα 1 A

Προδιαγραφές φορτιστή

Τάση εισόδου φορτιστή	5 VDC +/-10%, ρεύμα 500 mA
Προδιαγραφές καλωδίου USB	5 V ελάχ. 1 A, USB-A με USB-C, μέγιστο μήκος 3 m

4. Φόρτιση του συστήματος CROS



- ① Χαμηλή ισχύς μπαταρίας: Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, θα ακούσετε δύο μπιπ στο ακουστικό βαρηκοΐας. Θα έχετε χρονικό περιθώριο περίπου 60 λεπτών πριν χρειαστεί να φορτίσετε τη συσκευή CROS (το χρονικό περιθώριο μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του ακουστικού βαρηκοΐας ή της συσκευής CROS).
- ① Η συσκευή CROS περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ① Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα CROS για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.
- ① Το σύστημα CROS πρέπει να είναι στεγνό πριν από τη φόρτιση, βλ. κεφάλαιο 16.
- ① Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε και χρησιμοποιείτε το σύστημα CROS εντός εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας: +5° έως +40° Κελσίου (41° έως 104° Φαρενάιτ).

4.1 Χρήση του Charger Case Combi ή του Mini Charger Case

Για οδηγίες ρύθμισης του φορτιστή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.

1.

Τοποθετήστε το σύστημα CROS στις θέσεις φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις αριστερά και δεξιά της συσκευής CROS και του ακουστικού βαρηκοΐας ταιριάζουν με τις ενδείξεις αριστερά (μπλε) και δεξιά (κόκκινο) δίπλα στις θέσεις φόρτισης. Το σύστημα CROS απενεργοποιείται αυτόματα όταν τοποθετείται στον φορτιστή.

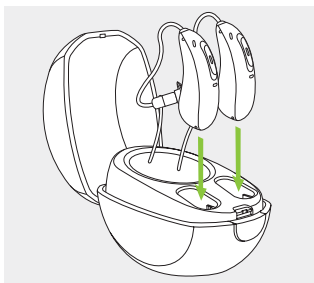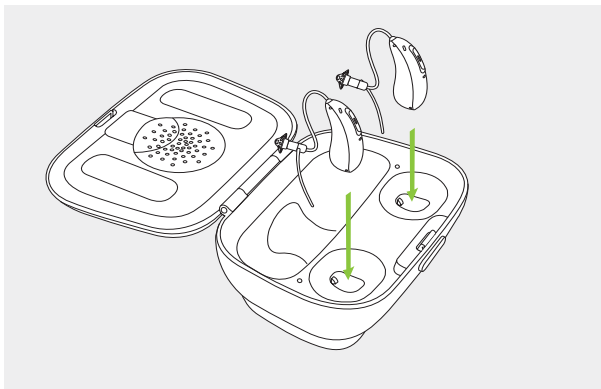





2.


Η ενδεικτική λυχνία θα υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας έως ότου το σύστημα CROS φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη, δηλ. με σταθερό πράσινο φως.

Η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει αυτόματα όταν οι μπαταρίες φορτίσουν πλήρως, έτσι το σύστημα CROS μπορεί να μείνει με ασφάλεια εντός του φορτιστή.

Η φόρτιση του συστήματος CROS μπορεί να διαρκέσει έως 3 ώρες. Το κάλυμμα του φορτιστή μπορεί να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Χρόνοι φόρτισης

Ενδεικτική λυχνία	Κατάσταση φόρτισης	Εκτιμώμενοι χρόνοι φόρτισης
	0 – 10%	
	11 – 80%	30 λεπτά (30%) 60 λεπτά (50%) 90 λεπτά (80%)
	81 – 99%	
	100%	3 ώρες

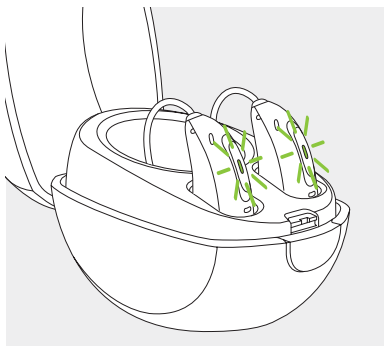

3.

Αφαιρέστε το σύστημα CROS από τις θέσεις φόρτισης



1. τραβώντας τη συσκευή CROS και το ακουστικό βαρηκοΐας προσεκτικά προς τα εσάς και
2. αφαιρώντας το από τον φορτιστή.

i Μην κρατάτε τα σωληνάκια για την αφαίρεση της συσκευής CROS από τον φορτιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα σωληνάκια.

Το σύστημα CROS ενεργοποιείται αυτόματα όταν το αφαιρείτε από τον φορτιστή. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει. Η σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι η συσκευή CROS και το ακουστικό βαρηκοΐας είναι έτοιμα.

Αν αποσυνδέσετε τον φορτιστή από την πρίζα ενώ το σύστημα CROS φορτίζει, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και τη συσκευή CROS και το ακουστικό βαρηκοΐας για να μην γίνει αποφόρτιση.

i Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας και τη συσκευή CROS προτού τα εισαγάγετε στον αποσυνδεδεμένο φορτιστή για να τα αποθηκεύσετε.

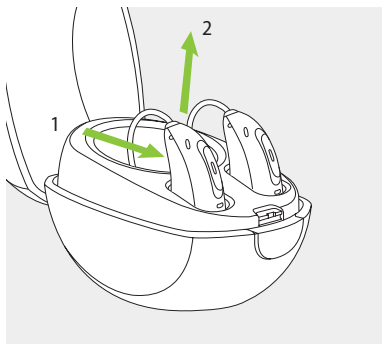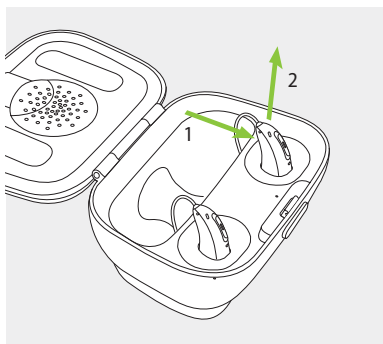


4.2 Χρήση του προαιρετικού Power Pack

Σημείωση: Το Power Pack είναι συμβατό μόνο με το Charger Case Combi.

1.

Προσαρτήστε το Power Pack στο κάτω μέρος του Charger Case Combi και ασφαλίστε το.

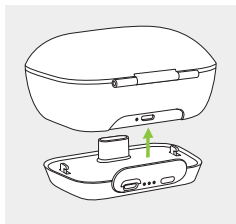


2.

Τοποθετήστε το micro-USB και συνδέστε το σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Το Power Pack και το σύστημα CROS θα φορτιστούν ταυτόχρονα. Όταν το Power Pack είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η ενδεικτική λυχνία του υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας του Power Pack.

- ❶ Πριν χρησιμοποιήσετε το Power Pack για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.
- ❶ Το Power Pack περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου.

Σύνδεση micro-USB σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

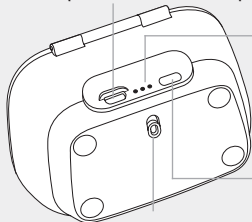

Ενδεικτική λυχνία
κατάστασης μπαταρίας:

- 0%-29%
- 30%-59%
- 60%-100%

Κουμπί ελέγχου μπαταρίας

Μηχανισμός ασφάλισης και απασφάλισης Power Pack

- 3.** Για να ελέγξετε την ισχύ μπαταρίας που απομένει στο Power Pack, πιάστε το κουμπί προγραμμάτων μπαταρίας. Οι ενδεικτικές λυχνίες υποδεικνύουν την κατάσταση.


- i** Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε το Power Pack εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας: +5° έως +40° Κελσίου (41° έως 104° Φαρενάιτ)

5. Ενδείξεις αριστερής και δεξιάς συσκευής CROS

Υπάρχει μια κόκκινη ή μπλε ένδειξη στο πίσω μέρος της συσκευής CROS και στο ομοίωμα ηχείου. Το χρώμα της ένδειξης υποδεικνύει αν η συσκευή CROS προορίζεται για τοποθέτηση στο αριστερό ή στο δεξί αυτί.

Μπλε ένδειξη για την αριστερή συσκευή.


Κόκκινη ένδειξη για τη δεξιά συσκευή.

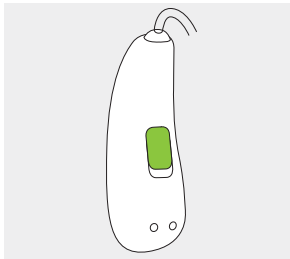

6. Τοποθέτηση της συσκευής CROS


1.

Τοποθετήστε τη συσκευή CROS πίσω από το αυτί σας.

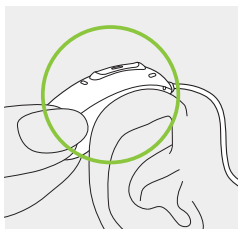


2.

Τοποθετήστε το ακροφύσιο στον ακουστικό πόρο σας.

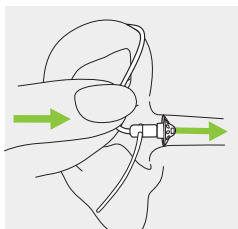


3.

Αν το ακροφύσιο είναι συνδεδεμένο με στοιχείο συγκράτησης, τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα του αυτιού σας για να στερεώσετε με ασφάλεια τη συσκευή CROS.

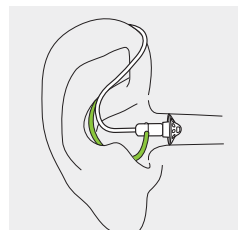

7. Αφαίρεση της συσκευής CROS


Τραβήξτε το κυρτό τμήμα του σωλήνα και αφαιρέστε τη συσκευή CROS από το πίσω μέρος του αυτιού.

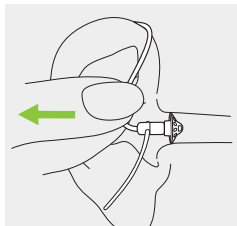

8. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών διαθέτει αρκετές λειτουργίες.


Λειτουργεί ως διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ως ρυθμιστής έντασης ήχου αν δεν υπάρχει ασύρματη μετάδοση ήχου από τη συσκευή CROS προς το ακουστικό βαρηκοΐας, ελέγχει την ισοστάμιση όταν υπάρχει ασύρματη μετάδοση ήχου από τη συσκευή CROS προς το ακουστικό βαρηκοΐας ή/και αλλάζει το πρόγραμμα ανάλογα με τον προγραμματισμό της συσκευής CROS. Αυτό υποδεικνύεται στις εξατομικευμένες «Οδηγίες συσκευής CROS και ακουστικού βαρηκοΐας» που σας έχουν δοθεί. Για να προμηθευτείτε το έντυπο, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

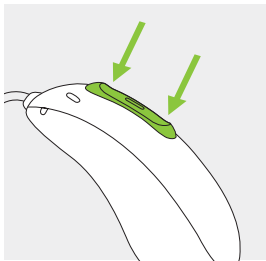

Αν το σύστημα CROS είναι συζευγμένο με τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth, με σύντομο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού αποδέχεστε και με παρατεταμένο πάτημα απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση – ανατρέξτε στο κεφάλαιο 13.

9. Επισκόπηση συνδεσιμότητας

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι επιλογές συνδεσιμότητας που διατίθενται για το σύστημα CROS που διαθέτετε.

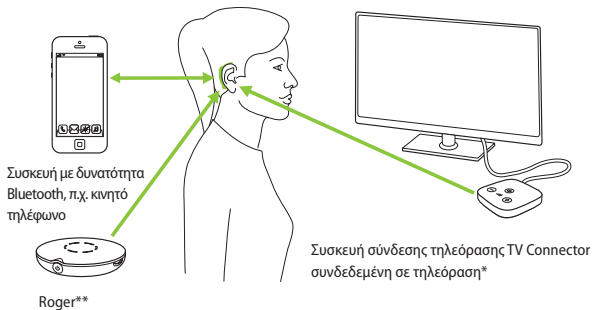

Η λεκτική σήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sonova AG πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.

* Η συσκευή σύνδεσης τηλεόρασης TV Connector μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε πηγή ήχου, όπως τηλεόραση, υπολογιστή ή στερεοφωνικό σύστημα.


** Μπορείτε να συνδέσετε και τα ασύρματα μικρόφωνα Roger στο σύστημα CROS που διαθέτετε.

10. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή CROS



Η συσκευή CROS έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν την αφαιρείτε από τον φορτιστή.

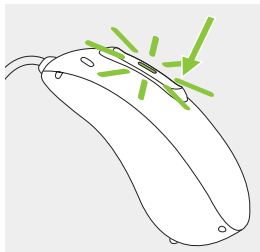Αν δεν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία, πιέστε σταθερά και κρατήστε πατημένο το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει. Περιμένετε μέχρι η σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία να υποδείξει ότι η συσκευή CROS είναι έτοιμη.



Απενεργοποιήστε τη συσκευή CROS

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η σταθερά αναμμένη κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδείξει ότι το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο.

	Λυχνία που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η συσκευή CROS ενεργοποιείται
	Λυχνία αναμμένη σταθερά με κόκκινο χρώμα για 2 δευτερόλεπτα	Η συσκευή CROS απενεργοποιείται

i Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής CROS μπορεί να ακούσετε μια μελωδία εκκίνησης στην πλευρά που έχετε τοποθετήσει το ακουστικό βαρηκοΐας.

11. Tap control

Το Tap Control διατίθεται μόνο για τα μοντέλα Audéo P90 και Audéo P70.

Αν αυτά αποτελούν μέρος του συστήματος CROS, οι λειτουργίες του Tap Control περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας.

12. Αρχική σύζευξη

12.1 Αρχική σύζευξη με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- ① Η διαδικασία σύζευξης με κάθε συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά. Μετά την αρχική σύζευξη, το σύστημα CROS θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή. Η αρχική διαδικασία σύζευξης μπορεί να διαρκέσει έως και 2 λεπτά.

1.

Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας (π.χ. τηλέφωνο) και αναζητήστε συσκευές με δυνατότητα Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων συνδεσιμότητας.

2.

Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας και τη συσκευή CROS.

Έχετε τώρα 3 λεπτά για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος CROS με τη συσκευή σας.



3.

Στη συσκευή σας εμφανίζεται μια λίστα των συσκευών με δυνατότητα Bluetooth. Επιλέξτε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη λίστα για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος CROS με τη συσκευή. Ένας ήχος μπιπ επιβεβαιώνει την επιτυχή σύζευξη.

- ❶ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες σύζευξης με συσκευές, οι οποίες διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που ισχύουν για ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς κατασκευαστές τηλεφώνων, μεταβείτε στη διεύθυνση:
<https://www.phonak.com/com/en/support.html>

12.2 Σύνδεση στη συσκευή

Μετά τη σύζευξη του συστήματος CROS με τη συσκευή σας, η μεταξύ τους σύνδεση θα γίνεται στο εξής αυτόματα κατά την ενεργοποίησή τους.

- ❶ Η σύνδεση θα διατηρηθεί για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή παραμένει ενεργοποιημένη και εντός εμβέλειας.
- ❶ Το σύστημα CROS μπορεί να συνδέεται με μία συσκευή κάθε φορά και να είναι συζευγμένο με έως και οκτώ συσκευές.

13. Τηλεφωνικές κλήσεις

Το σύστημα CROS συνδέεται άμεσα με τηλέφωνα με δυνατότητα Bluetooth. Όταν η συσκευή είναι συζευγμένη και συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας, θα ακούτε τη φωνή του συνομιλητή κατευθείαν στο ακουστικό βαρηκοΐας σας. Τα μικρόφωνα του ακουστικού βαρηκοΐας σας λαμβάνουν τη φωνή σας και τη μεταδίδουν στο τηλέφωνο.



Η λεκτική σήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sonona AG πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.

13.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί κλήσης. Θα ακούσετε τον τόνο κλήσης μέσω του ακουστικού βαρηκοΐας. Τα μικρόφωνα του ακουστικού βαρηκοΐας σας λαμβάνουν τη φωνή σας και τη μεταδίδουν στο τηλέφωνο.

13.2 Αποδοχή κλήσης

Όταν κάποιος σας τηλεφωνεί, ακούγεται στο ακουστικό βαρηκοΐας μια ειδοποίηση κλήσης.

Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση με πάτημα δύο φορές στο επάνω μέρος του αυτιού σας (διατίθεται μόνο για μοντέλα P90 και P70), με σύντομο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας σας ή στη συσκευή CROS (λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας στο τηλέφωνό σας.




13.3 Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση πατώντας δύο φορές στο επάνω μέρος του αυτιού σας (διατίθεται μόνο για μοντέλα P90 και P70), με παρατεταμένο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας σας ή στη συσκευή CROS (περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας στο τηλέφωνό σας.



13.4 Απόρριψη κλήσης

Μπορείτε να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση με παρατεταμένο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας σας ή στη συσκευή CROS (περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας στο τηλέφωνό σας.

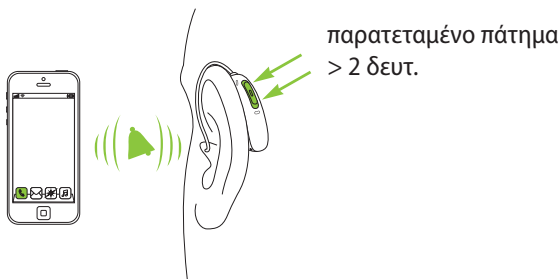




14. Λειτουργία πτήσης

Το σύστημα CROS λειτουργεί σε εμβέλεια συχνότητας 2,4 GHz - 2,48 GHz. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ορισμένοι αερομεταφορείς ζητούν τη θέση όλων των συσκευών σε λειτουργία πτήσης. Η θέση σε λειτουργία πτήσης δεν απενεργοποιεί την κανονική λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας, μόνο τις λειτουργίες συνδεσιμότητας Bluetooth, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης μετάδοσης ήχου από τη συσκευή CROS προς το ακουστικό βαρηκοΐας στο άλλο αυτί.

14.1. Θέση σε λειτουργία πτήσης

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία και να θέσετε κάθε συσκευή σε λειτουργία πτήσης:

1.		Αν η συσκευή CROS είναι απενεργοποιημένη, προχωρήστε στο Βήμα 2. Αν η συσκευή CROS είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε τη κρατώντας πατημένο το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα για 2 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή CROS απενεργοποιείται.
2.		Πατήστε παρατεταμένα το κάτω μέρος του κουμπιού. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν εκκινείται η συσκευή CROS.
3.		Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί για 7 δευτερόλεπτα, έως ότου η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα και έπειτα αφήστε το κουμπί. Η σταθερά αναμμένη πορτοκαλί λυχνία υποδεικνύει ότι η συσκευή CROS είναι σε λειτουργία πτήσης.




Στη λειτουργία πτήσης, το σύστημα CROS δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα στο τηλέφωνό σας.

14.2 Έξοδος από τη λειτουργία πτήσης

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία και να τερματίσετε τη λειτουργία πτήσης σε κάθε συσκευή:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή CROS και ενεργοποιήστε τη ξανά - ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9.

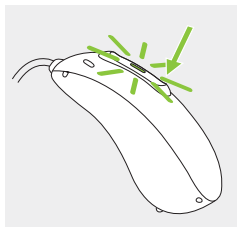

15. Επανεκκίνηση της συσκευής CROS

Χρησιμοποιήστε αυτήν την τεχνική αν η συσκευή CROS είναι σε κατάσταση σφάλματος. Αυτό δεν θα αφαιρέσει ή διαγράψει κάποιο πρόγραμμα ή ρυθμίσεις.

1.

Πατήστε το κάτω μέρος του κουμπιού για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν η συσκευή CROS είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη πριν πατήσετε το κουμπί. Δεν θα υπάρξει φωτεινή ή ηχητική ειδοποίηση όταν περάσουν τα 15 δευτερόλεπτα.

2.

Τοποθετήστε τη συσκευή CROS στον φορτιστή που είναι συνδεδεμένος με πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα. Η συσκευή CROS είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

16. Συνθήκες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι η χρήση, η φόρτιση, η μεταφορά και η αποθήκευση της συσκευής CROS και του Power Pack γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:

	Χρήση	Φόρτιση σε εξέλιξη	Μεταφορά	Αποθήκευση
Θερμοκρασία				
Μέγιστο εύρος	+5° έως +40 °C (41° έως 104 °F)	+5° έως +40 °C (41° έως 104 °F)	-20° έως +60 °C (-4° έως 140 °F)	-20° έως +60 °C (-4° έως 140 °F)
Συνιστώμενο εύρος	+5° έως +40 °C (41° έως 104 °F)	+7° έως +32 °C (45° έως 90 °F)	0° έως +20 °C (32° έως 68 °F)	0° έως +20 °C (32° έως 68 °F)
Υγρασία				
Μέγιστο εύρος	0% έως 85% (χωρίς συμπίκνωση)	0% έως 85% (χωρίς συμπίκνωση)	0% έως 70%	0% έως 70%
Συνιστώμενο εύρος	0% έως 60% (χωρίς συμπίκνωση)	0% έως 60% (χωρίς συμπίκνωση)	0% έως 60%	0% έως 60%
Ατμοσφαιρική πίεση	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa

Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε τακτικά τη συσκευή CROS και το Power Pack κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση.

Η συσκευή CROS κατηγοριοποιείται ως IP68. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη, ενώ είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει τις καθημερινές συνθήκες. Μπορεί να φορεθεί στη βροχή αλλά δεν θα πρέπει να βυθίζεται στο νερό ή να χρησιμοποιείται στο μπάνιο, στην κολύμβηση ή σε άλλες δραστηριότητες νερού. Η συσκευή CROS δεν θα πρέπει να εκτίθεται ποτέ σε χλωριωμένο νερό, σαπούνι, αλμυρό νερό ή σε άλλα υγρά με χημικό περιεχόμενο.

17. Φροντίδα και συντήρηση

Η προσεκτική και τακτική φροντίδα της συσκευής CROS και των φορτιστών σας, συμβάλλει στην υψηλή απόδοση και την παράταση της διάρκειας ζωής τους. Η Sonova AG, για να εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής, παρέχει ελάχιστη περίοδο τεχνικής υποστήριξης πέντε ετών από την κατάργηση της αντίστοιχης συσκευής CROS.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω προδιαγραφές ως κατευθυντήριες οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 23.2.

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρέι για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να αφαιρείτε τη συσκευή CROS από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Το σύστημα CROS είναι ανθεκτικό στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, η συσκευή CROS πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται.
- Η συσκευή CROS πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Βεβαιώνετε πάντα ότι το σύστημα CROS και ο φορτιστής είναι στεγνά και καθαρά πριν από τη φόρτιση.

Καθημερινά

Συσκευή CROS: Ελέγχετε αν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας και υγρασίας στο ακροφύσιο και καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ. λπ., για τον καθαρισμό της συσκευής CROS. Δεν συνιστάται το ξέπλυμα με νερό. Αν απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός της συσκευής CROS, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα ή τις κάψουλες αφύγρανσης.

Φορτιστές: Βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις φόρτισης είναι καθαρές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικούς παράγοντες όπως οικιακά απορρυπαντικά, σαπούνι κ.λπ. για τον καθαρισμό του φορτιστή σας.

Εβδομαδιαία

Συσκευή CROS: Καθαρίζετε το ακροφύσιο με ένα μαλακό, υγρό πανί ή με ειδικό πανί καθαρισμού για συσκευές CROS. Για πιο αναλυτικές οδηγίες συντήρησης ή για οδηγίες σχολαστικού καθαρισμού, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας. Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης της συσκευής CROS με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Φορτιστές: Αφαιρέστε σκόνη ή βρομιά από τις θέσεις φόρτισης.




Πριν από τον καθαρισμό, διασφαλίζετε πάντα ότι ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.

18. Αντικατάσταση του ακροφύσιου από τον ακουστικό σωλήνα

18.1 Αφαίρεση του ακροφύσιου από το ομοίωμα ηχείου


1.

Αφαιρέστε το ακροφύσιο από το ομοίωμα ηχείου κρατώντας το ομοίωμα ηχείου στο ένα χέρι και το ακροφύσιο στο άλλο.

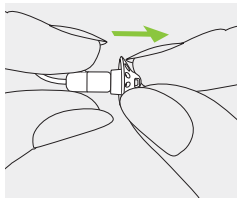


2.

Τραβήξτε προσεκτικά το ακροφύσιο για να το αφαιρέσετε.

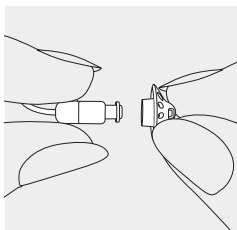

3.


Καθαρίστε το ομοίωμα ηχείου με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

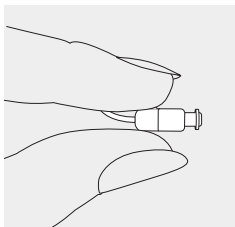

18.2 Προσάρτηση του ακροφύσιου στο ομοίωμα ηχείου


1.

Κρατήστε το ομοίωμα ηχείου στο ένα χέρι και το ακροφύσιο στο άλλο.

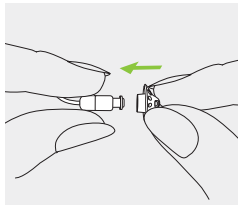


2.

Σύρετε το ακροφύσιο πάνω από το ομοίωμα ηχείου.

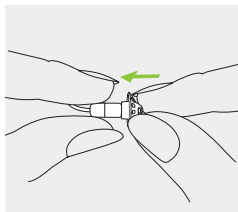

3.

Το ομοίωμα ηχείου και το ακροφύσιο θα πρέπει να εφαρμόζουν τέλεια μεταξύ τους.

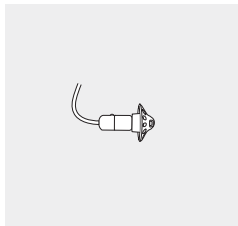

19. Επισκευή και εγγύηση

Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε το σύστημα CROS και τους φορτιστές σας.

Διεθνής εγγύηση

Η Sonova AG παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς.

Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στη συσκευή CROS και τους φορτιστές, αντίστοιχα, αλλά όχι σε αξεσουάρ όπως σωληνάκια, εξαρτήματα για το αυτί και εξωτερικούς δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολικής καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει τυχόν επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στον χώρο εργασίας του.

Σειριακοί αριθμοί

συσκευής CROS: _____

αριστερά

δεξιά

Charger Case Combi: _____

Charger BTE RIC: _____

Mini Charger Case: _____

Power Pack: _____

Ημερομηνία αγοράς:

Εξουσιοδοτημένος ακοοπροθετιστής
(σφραγίδα/υπογραφή):

20. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Sonona AG δηλώνει διά του παρόντος ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Phonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη λίστα που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.phonak.com/us/en/certificates (Αντιπροσωπείες της Phonak σε ολόκληρο τον κόσμο).

Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία:



R-NZ

Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM - Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA - Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις εν λόγω χώρες. Η ετικέτα συμμόρφωσης R-NZ προορίζεται για προϊόντα ραδιοεπικοινωνίας που κυκλοφορούν στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας υπό το επίπεδο συμμόρφωσης A1.

Το μοντέλο που αναφέρεται στη σελίδα 2 είναι πιστοποιημένο βάσει των παρακάτω:

Phonak CROS P-R

ΗΠΑ

Καναδάς

Αρ. Αναγνώρισης FCC: KWC-MRP

IC: 2262A-MRP

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση 2:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Sonoma AG μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της άδειας χειρισμού της συσκευής αυτής βάσει των κανονισμών FCC.

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά.

Τα όρια αυτά προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για υποστήριξη.

Πληροφορίες ραδιοεπικοινωνίας για την ασύρματη συσκευή CROS

Τύπος κεραίας	Συντονισμένη κεραία βρόχου
Συχνότητα λειτουργίας	2,4 GHz – 2,48 GHz
Διαμόρφωση	GFSK, GMSK
Ακτινοβολούμενη ισχύς	< 2,5 mW
Bluetooth	
Εύρος	~1 m
Bluetooth	4.2 LE Διπλή λειτουργία
Υποστηριζόμενα προφίλ	HFP (προφίλ Hands-free), A2DP

Συμμόρφωση με πρότυπα εκπομπών και ατρωσίας

Πρότυπα εκπομπών	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Πρότυπα ατρωσίας	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
	ISO 7637-2:2011

21. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Sonona AG επιβεβαιώνει ότι το προϊόν αυτό –συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ– πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 2017/745 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο του κανονισμού και της οδηγίας ανωτέρω.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.



Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.



Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος



Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο αντιπρόσωπος για την ΕΚ είναι, επίσης, ο εισαγωγέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις για τις μπαταρίες που υπάρχουν σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για τον χειρισμό και την ασφάλεια του προϊόντος.



Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από τη συσκευή βρίσκεται εντός των ορίων που έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ.



Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM - Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA - Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις συγκεκριμένες χώρες.



Η λεκτική σήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sonova AG πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Segurança



Το σήμα αναγνώρισης της συμμόρφωσης υποδεικνύει ότι η συσκευή συνάδει με τις απαιτήσεις αξιολόγησης συμμόρφωσης της Βραζιλίας για τον εξοπλισμό στο πλαίσιο του συστήματος επιτήρησης της υγείας. Το OCP υποδεικνύει τον οργανισμό πιστοποίησης.



Ιαπωνικό σήμα για πιστοποιημένο ραδιοεξοπλισμό.



Υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.



Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.



Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

IP68

Δείκτης προστασίας από εισχώρηση.
Ο δείκτης IP68 υποδεικνύει ότι το ακουστικό βαρηκοΐας είναι ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη. Πέρασε με επιτυχία δοκιμή συνεχούς βύθισης σε 1 μέτρο νερού για 60 λεπτά και 8 ώρες σε θάλαμο σκόνης σύμφωνα με το πρότυπο IEC60529.



Θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: -20° έως $+60^{\circ}$ Κελσίου (-4° έως $+140^{\circ}$ Φαρενάιτ).



Υγρασία κατά την αποθήκευση: 0% έως 70%, εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Για οδηγίες σχετικά με την αφύγρανση της συσκευής CROS μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο 23.2.



Ατμοσφαιρική πίεση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: 500 hPa έως 1060 hPa



Κατά τη μεταφορά, διατηρείτε το προϊόν στεγνό.



Το σύμβολο με τον διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή CROS καθώς και ο φορτιστής δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως τα κοινά οικιακά απόβλητα. Οι παλιές ή μη χρησιμοποιημένες συσκευές CROS και οι φορτιστές τους πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται στον ακοοπροθετιστή σας για απόρριψη. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Σύμβολα που ισχύουν μόνο για το ευρωπαϊκό τροφοδοτικό



Τροφοδοτικό με διπλή απομόνωση.



Συσκευή σχεδιασμένη για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.



Μετασχηματιστής απομόνωσης ασφαλείας, προστασία βραχυκυκλώματος.

22. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα

Αιτίες

Το σύστημα CROS δεν λειτουργεί

Βουλωμένο ηχείο/ακροφύσιο του ακουστικού βαρηκοΐας

Η συσκευή CROS ή το ακουστικό βαρηκοΐας είναι απενεργοποιημένα

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως

Η συσκευή CROS δεν ενεργοποιείται

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως

Το κουμπί απενεργοποιήθηκε κατά λάθος, επειδή πατήθηκε για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα

Η ενδεικτική λυχνία της συσκευής CROS δεν ανάβει κατά την τοποθέτηση της συσκευής CROS στις θέσεις φόρτισης

Η συσκευή CROS δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή

Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως

Η ενδεικτική λυχνία στη συσκευή CROS είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα όταν η συσκευή CROS βρίσκεται στον φορτιστή

Βρώμικες επαφές φόρτισης

Η συσκευή CROS βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασίας της λειτουργίας της

Ελαττωματική μπαταρία

Η ενδεικτική λυχνία στη συσκευή CROS σβήνει όταν η συσκευή CROS αφαιρείται από τον φορτιστή

Το χαρακτηριστικό «Auto On» είναι απενεργοποιημένο

Η ενδεικτική λυχνία της συσκευής CROS παραμένει σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα μετά την αφαίρεση από τον φορτιστή

Η ενδεικτική λυχνία στη συσκευή CROS ήταν αναμμένη με κόκκινο χρώμα όταν η συσκευή CROS τοποθετήθηκε στον φορτιστή

Τι να κάνετε

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/το ακροφύσιο του ακουστικού βαρηκοΐας

Πιέστε το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα (κεφάλαιο 10)

Φορτίστε τη συσκευή CROS (κεφάλαιο 4)

Φορτίστε τη συσκευή CROS (κεφάλαιο 4)

Εκτελέστε το βήμα 2 για τη διαδικασία επανεκκίνησης (κεφάλαιο 14)

Τοποθετήστε σωστά τη συσκευή CROS στον φορτιστή (κεφάλαιο 4)

Συνδέστε τον φορτιστή σε πηγή τροφοδοσίας (κεφάλαιο 3)

Περιμένετε τρεις ώρες αφού τοποθετήσετε τη συσκευή CROS στον φορτιστή, ανεξάρτητα από την αντίδραση της λυχνίας LED

Καθαρίστε τις επαφές της συσκευής CROS και του φορτιστή

Θερμάνετε τη συσκευή CROS. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι +5° έως +40° Κελσίου (+41° έως +104° Φαρενάιτ)

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

Ενεργοποιήστε τη συσκευή CROS (κεφάλαιο 9)

Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής CROS (κεφάλαιο 14)

Πρόβλημα	Αιτίες
Η μπαταρία δεν διαρκεί ολόκληρη την ημέρα	Μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης δεν είναι εφικτή	Το σύστημα CROS είναι σε λειτουργία πτήσης Το σύστημα CROS δεν είναι συζευγμένο με το τηλέφωνο
Δεν αρχίζει η φόρτιση (χωρίς χρήση Power Pack)	Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας Η συσκευή CROS δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή
Δεν αρχίζει η φόρτιση με χρήση του Power Pack	Power Pack αποφορτισμένο

i Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας για βοήθεια.

Τι να κάνετε

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας. Μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση της μπαταρίας

Απενεργοποιήστε τη συσκευή CROS και ενεργοποιήστε τη ξανά (κεφάλαιο 13.2).

Κάντε σύζευξη του συστήματος CROS με το τηλέφωνο (κεφάλαιο 12)

Συνδέστε τον φορτιστή σε πηγή τροφοδοσίας ή στο Power Pack (κεφάλαιο 4.2)

Τοποθετήστε σωστά τη συσκευή CROS στον φορτιστή (κεφάλαιο 4.1)

Φορτίστε το Power Pack (κεφάλαιο 4.2)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
<https://www.phonak.com/com/en/support.html>.

23. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες ασφαλείας και περιορισμών χρήσης στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή CROS.

Ενδεδειγμένη χρήση - Συσκευή CROS

Η συσκευή CROS της Phonak τοποθετείται στο αυτί χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης της ακοής και μεταδίδει ασύρματα ήχο στο συμβατό ακουστικό βαρηκοΐας Phonak που βρίσκεται στο άλλο αυτί.

Ενδεδειγμένη χρήση - Φορτιστές

Οι φορτιστές προορίζονται για τη φόρτιση της μπαταρίας του επαναφορτιζόμενου ακουστικού βαρηκοΐας.

Ενδείξεις

Συσκευή CROS: Η συσκευή ενδείκνυται για απώλεια ακοής χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης στο ένα αυτί και καλύτερη ακοή στο άλλο αυτί.

Φορτιστές: Λάβετε υπόψη ότι οι ενδείξεις δεν προέρχονται από τον φορτιστή, αλλά από τη συμβατή συσκευή CROS.

Αντενδείξεις

Οι γενικές κλινικές αντενδείξεις για τη χρήση μιας συσκευής CROS είναι:

- Υποβοηθούμενη απώλεια ακοής (στην πλευρά για την οποία προορίζεται το CROS)
- Οξείες εμβοές (σε οποιοδήποτε από τα δύο αυτιά)
- Ανατομική παραμόρφωση του αυτιού για το οποίο προορίζεται το CROS (π.χ. ανωτία)

Τα βασικά κριτήρια για την παραπομπή ενός ασθενή για ιατρική ή άλλη εξειδικευμένη γνώμη ή/και θεραπεία είναι τα εξής:

- Ιστορικό ενεργής αποστράγγισης από το αυτί τις προηγούμενες 90 ημέρες
- Ιστορικό ξαφνικής ή ταχείας προόδου απώλειας ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά τις προηγούμενες 90 ημέρες
- Οξύς ή χρόνιος ίλιγγος
- Εμφανή στοιχεία σημαντικής συσσώρευσης κυψελίδας ή ξένου σώματος στον ακουστικό πόρο
- Πόνος ή δυσφορία στο αυτί
- Μη φυσιολογική όψη του τυμπάνου και του ακουστικού πόρου, όπως:
 - Φλεγμονή του εξωτερικού ακουστικού πόρου
 - Διάτρητο τύμπανο

- Άλλες ανωμαλίες που ο ακοοπροθετιστής πιστεύει ότι χρήζουν ιατρικής φροντίδας

Ο ακοοπροθετιστής μπορεί να αποφασίσει ότι η παραπομπή δεν είναι απαραίτητη ή προς όφελος του ασθενή, όταν ισχύουν τα ακόλουθα:

- Υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η κατάσταση έχει διερευνηθεί πλήρως από ειδικό ιατρό και ότι έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε πιθανή θεραπεία
- Η κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί ή αλλάξει σημαντικά από την προηγούμενη εξέταση ή/και θεραπεία

Εάν ο ασθενής έχει λάβει την εμπεριστατωμένη και επαρκή απόφαση να μην αποδεχτεί συμβουλές για να ζητήσει ιατρική γνώμатеυση, επιτρέπεται να προχωρήσει στη σύσταση κατάλληλων συστημάτων ακουστικών βαρηκοΐας σύμφωνα με τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

- Το συνιστώμενο σύστημα ακουστικού βαρηκοΐας δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ή στη γενική ευεξία του ασθενή
- Τα αρχεία επιβεβαιώνουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες εκτιμήσεις για ό,τι ωφελεί καλύτερα τον ασθενή

Σε περίπτωση που απαιτείται βάσει νόμου, ο ασθενής έχει υπογράψει αποποίηση ευθυνών για να επιβεβαιώσει ότι η συμβουλή παραπομπής δεν έχει γίνει αποδεκτή και ότι πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη απόφαση.

Φορτιστές: Λάβετε υπόψη ότι οι αντενδείξεις δεν προέρχονται από τον φορτιστή, αλλά από τη συμβατή συσκευή CROS.

Η συσκευή CROS δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν αποτρέπει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης της συσκευής CROS, ο ασθενής δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση της συσκευής CROS αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεανάγνωση.

Η συσκευή CROS είναι κατάλληλη για φροντίδα υγείας κατ' οίκον και λόγω της φορητότητάς της ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον επαγγελματικής φροντίδας υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία κ.λπ.

Ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών

Συσκευή CROS: Αυτή η συσκευή ενδείκνυται για ασθενείς ηλικίας 36 μηνών και άνω, με απώλεια ακοής χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης στο ένα αυτί και καλύτερη ακοή στο άλλο αυτί.

Φορτιστές: Ο ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών είναι οι χρήστες συμβατής συσκευής CROS.

Ενδεδειγμένος χρήστης

Συσκευή CROS: Ενδείκνυται για τα άτομα με απώλεια ακοής χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης στο ένα αυτί και καλύτερη ακοή στο άλλο αυτί, που χρησιμοποιούν τη συσκευή CROS, και για τους φροντιστές τους. Ο ακοοπροθετιστής είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της συσκευής CROS.

Φορτιστές: Ενδείκνυται για τα άτομα με απώλεια ακοής που χρησιμοποιούν τη συμβατή επαναφορτιζόμενη συσκευή CROS, τους φροντιστές τους και τον ακοοπροθετιστή.

Κλινικό όφελος:

Συσκευή CROS: Η συσκευή CROS από μόνη της δεν προσφέρει άμεσο κλινικό όφελος. Το κλινικό όφελος, το οποίο είναι η βελτίωση της κατανόησης ομιλίας, προσφέρεται από τον συνδυασμό του συμβατού ακουστικού βαρηκοΐας με τη συσκευή CROS.

Φορτιστές: Ο φορτιστής από μόνος του δεν προσφέρει άμεσο κλινικό όφελος. Το έμμεσο κλινικό όφελος που προσφέρει είναι ότι καθιστά εφικτή την επίτευξη του ενδεδειγμένου σκοπού της μητρικής συσκευής (της επαναφορτιζόμενης συσκευής CROS).

Παρενέργειες

Συσκευή CROS: Η χρήση της συσκευής CROS μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες φυσιολογικές παρενέργειες ή αντιδράσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν λόγω του σχήματος και του υλικού του περιβλήματος και του ακροφύσιου, όπως:

- συσσώρευση κυψελίδας,
- υπερβολική πίεση,
- συσσώρευση ιδρώτα ή υγρασίας στον ακουστικό πόρο,
- φουσκάλες, κνησμό ή/και εξανθήματα,
- αίσθηση βουλώματος ή κορεσμού στα αυτιά
- και οι συνέπειές τους (π.χ. πόνος στο αυτί).

Αν προκύψει οποιαδήποτε από αυτές τις παρενέργειες, συμβουλευτείτε περαιτέρω τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας. Η συσκευή CROS χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα αντίπλευρο συμβατό ακουστικό βαρηκοΐας. Από τη χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας ενδέχεται να προκληθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες που σχετίζονται με την ακουστική του έξοδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.





Φορτιστές: Λάβετε υπόψη ότι οι παρενέργειες δεν προέρχονται από τον φορτιστή, αλλά από τη συμβατή συσκευή CROS.

Τυχόν σοβαρό συμβάν που προέκυψε σε σχέση με τη συσκευή CROS θα πρέπει να αναφέρεται στον εκπρόσωπο του κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους κατοικίας. Ως σοβαρό συμβάν περιγράφεται οποιοδήποτε συμβάν που προκάλεσε άμεσα ή έμμεσα ή θα μπορούσε να προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:


- α) τον θάνατο ασθενούς, χρήστη ή άλλου ατόμου
- β) την προσωρινή ή μόνιμη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας ασθενούς, χρήστη ή άλλου ατόμου
- γ) σοβαρή απειλή της δημόσιας υγείας


Για να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη λειτουργία ή συμβάν, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.


23.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου


-  Η επαναφορτιζόμενη συσκευή CROS και το Phonak Power Pack περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου, τις οποίες μπορείτε να έχετε μαζί σας σε αεροσκάφη ως χειραποσκευές. Το Power Pack δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε αποσκευές που παραδίδονται στο check-in και πρέπει να μεταφέρεται μόνο στις χειραποσκευές.
-  Η συσκευή CROS που διαθέτετε λειτουργεί σε εμβέλεια συχνότητας 2,4 GHz -2,48 GHz. Κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης, ρωτήστε αν σύμφωνα με τους κανόνες του αερομεταφορέα πρέπει οι συσκευές να τίθενται σε λειτουργία πτήσης. Βλ. κεφάλαιο 14.
-  Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στη συσκευή CROS αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Sonova AG. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στη συσκευή CROS.
-  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά περιβάλλοντα (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, ατμόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο ή χώροι στους οποίους

γίνεται χειρισμός εύφλεκτων αναισθητικών). Η συσκευή δεν φέρει πιστοποίηση ATEX.

 Αν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί, αν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος και ταχεία συσσώρευση κυψελίδας, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας.

 Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, επισκεφθείτε έναν ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.

 Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι τα προειδοποιητικά σήματα ή οι ήχοι που προέρχονται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή μερικώς.

 Η συσκευή CROS δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών. Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση πρέπει να γίνεται πάντα υπό επίτηρηση για να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους. Η συσκευή CROS είναι μια μικρή συσκευή και περιέχει μικρά εξαρτήματα. Μην αφήνετε παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση με τη συσκευή CROS χωρίς επίτηρηση. Σε περίπτωση κατάποσης,

επικοινωνήστε αμέσως με έναν ιατρό ή ένα νοσοκομείο, καθώς η συσκευή CROS ή τα εξαρτήματά της μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό!




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μια στρογγυλή μπαταρία λιθίου. Αυτές οι μπαταρίες είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς μέσα σε διάστημα 2 ωρών ή μικρότερο, σε περίπτωση κατάποσης ή εισαγωγής σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, είτε η μπαταρία είναι χρησιμοποιημένη, είτε καινούργια! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό σας χωρίς καθυστέρηση!




Φυλάσσετε τον φορτιστή μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης της κάψουλας αφύγρανσης, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό ή μεταβείτε σε νοσοκομείο.




Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να ανοίγει το Power Pack λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας.


 Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για άτομα με ενεργές εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές, κ.λπ.):


- Διατηρείτε την ασύρματη συσκευή CROS και τον φορτιστή σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα. Εάν προκύψουν παρεμβολές, μην χρησιμοποιείτε την ασύρματη συσκευή CROS και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού εμφυτεύματος. Λάβετε υπόψη ότι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ.λπ.
- Τυχόν μαγνήτες (π.χ. μαγνήτης EasyPhone κ.λπ.) πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα.


 Κατά τη μετάδοση φωνητικών κλήσεων ή μουσικής στο ακουστικό βαρηκοΐας, το σήμα από τη συσκευή CROS δεν μεταδίδεται πλέον στο ακουστικό βαρηκοΐας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε άγνοια ακουστικών καταστάσεων που υποδεικνύουν κίνδυνο.


 Η χρήση αυτού του εξοπλισμού δίπλα ή πάνω/κάτω από άλλο εξοπλισμό θα πρέπει να αποφεύγεται διότι μπορεί να οδηγήσει


σε ακατάλληλη λειτουργία. Αν η εν λόγω χρήση είναι απαραίτητη, αυτός ο εξοπλισμός και ο άλλος εξοπλισμός θα πρέπει να παρατηρούνται για την επαλήθευση της φυσιολογικής λειτουργίας τους.


 Η χρήση αξεσουάρ, μετατροπέων και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που ορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία αυτού του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα ακατάλληλη λειτουργία.


 Φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών, όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από 30 cm (12 ίντσες) από κάθε εξάρτημα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, μπορεί να σημειωθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

 Η θύρα USB του φορτιστή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται.

 Για τον φορτιστή, χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά IEC 62368-1 ή/και IEC 60601-1 με ονομαστική τιμή εξόδου 5 VDC. Ελάχ. 500 mA.

 Η συσκευή CROS δεν θα πρέπει να τοποθετείται με θηλές/ συστήματα προστασίας από κυψελίδα όταν χρησιμοποιείται από πελάτες με διάτρηση τυμπάνου, φλεγμονή του ακουστικού πόρου ή άλλως εκτεθειμένη κοιλότητα του μέσου ωτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε τη χρήση ενός κλασικού εκμαγείου. Στην απίθανη περίπτωση παραμονής οποιουδήποτε μέρους αυτού του προϊόντος στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.

 Αποφεύγετε τις ισχυρές κρούσεις στο αυτί όταν φοράτε μια συσκευή CROS με προσαρμοσμένο ακροφύσιο. Η σταθερότητα των προσαρμοσμένων ακροφύσιων έχει σχεδιαστεί για φυσιολογική χρήση. Τυχόν ισχυρή κρούση στο αυτί (π. χ. κατά τη διάρκεια της άθλησης) ενδέχεται να προκαλέσει θραύση του προσαρμοσμένου ακροφύσιου για το αυτί. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάτρηση του ακουστικού πόρου ή του τυμπάνου του αυτιού.

 Μετά από μηχανική καταπόνηση ή κραδασμό στο προσαρμοσμένο ακροφύσιο, βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτο πριν το τοποθετήσετε στο αυτί.

23.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος

- ① Αυτή η συσκευή CROS είναι ανθεκτική στο νερό, αλλά δεν είναι αδιάβροχη. Είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει την καταπόνηση που προκαλείται κατά τις τυπικές δραστηριότητες και την περιστασιακή, ακούσια έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Μην βυθίζετε ποτέ το σύστημα CROS σε νερό! Η συσκευή CROS δεν είναι σχεδιασμένη για τακτική εμβάπτιση σε νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά την κολύμβηση ή όταν κάνετε μπάνιο. Αφαιρείτε πάντα το σύστημα CROS πριν από αυτές τις δραστηριότητες, καθώς περιλαμβάνει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ① Μην πλένετε ποτέ τις εισόδους του μικροφώνου. Μπορεί να χάσει τις ειδικές ακουστικές του ιδιότητες.
- ① Προστατεύετε τη συσκευή CROS και τα αξεσουάρ φόρτισης από τη θερμότητα (μην την αφήνετε ποτέ κοντά σε παράθυρο ή στο αυτοκίνητο). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε τη συσκευή CROS ή τα αξεσουάρ θέρμανσης (λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης). Για τις ενδεδειγμένες μεθόδους αφύγρανσης, ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας.

- ① Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα φόρτισης κοντά σε επιφάνειες επαγωγικών εστιών. Οι αγώγιμες δομές μέσα στα εξαρτήματα φόρτισης μπορεί να απορροφήσουν επαγωγική ενέργεια με αποτέλεσμα θερμική καταστροφή.
- ① Η θηλή θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις μήνες ή όταν γίνεται άκαμπτη ή εύθραπτη. Με τον τρόπο αυτόν προλαμβάνεται η απόσπαση της θηλής από το στέλεχος του σωλήνα κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση από το αυτί.
- ① Προφυλάσσετε τη συσκευή CROS ή τα εξαρτήματα φόρτισης από πτώσεις! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή CROS ή στα εξαρτήματα φόρτισης.
- ① Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή CROS για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη σε ένα κουτί με μια κάψουλα αφύγρανσης ή σε μέρος με καλό αερισμό. Αυτό επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας από τη συσκευή CROS και αποτρέπει τυχόν επιπτώσεις στην απόδοσή της.

- ❗ Η λειτουργία της συσκευής CROS μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφαιρείτε και φυλάσσετε τις συσκευές εκτός της αίθουσας/ του χώρου εξέτασης, πριν υποβληθείτε σε:
- Ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτίνες Χ (και σαρώσεις CT).
 - Ιατρικές εξετάσεις με σαρώσεις MRI/NMRI, κατά τις οποίες δημιουργούνται μαγνητικά πεδία.
- Κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (σε αεροδρόμια κ.λπ.) δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τη συσκευή CROS. Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, εφαρμόζεται εξαιρετικά χαμηλή δόση που δεν επηρεάζει τη συσκευή CROS.
- ❗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή CROS και τη συσκευή φόρτισης σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- ❗ Η συσκευή CROS πρέπει να είναι στεγνή πριν τη φόρτιση. Διαφορετικά δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της φόρτισης.
- ❗ Χρησιμοποιείτε μόνο τους εγκεκριμένους φορτιστές και το Power Pack που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης για τη φόρτιση της συσκευής CROS, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

- ① Τόσο η συσκευή CROS όσο και το Power Pack περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου με τιμή Watt ανά ώρα <20 Wh που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο UN 38.3 «Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων του ΟΗΕ» και θα πρέπει να αποστέλλονται σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς περί ασφαλούς αποστολής των μπαταριών ιόντων λιθίου.

- ① Ο φορτιστής και το τροφοδοτικό πρέπει να προστατεύονται από κραδασμούς. Αν προκληθεί ζημιά στον φορτιστή ή το τροφοδοτικό μετά από κραδασμό, οι συσκευές δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούνται.

- ① Μην καλύπτετε τελείως τα περιβλήματα των φορτιστών κατά τη διάρκεια της φόρτισης, π.χ. με κάποιο ύφασμα κ.λπ.

Ο ακοοπροθετιστής σας:



EC REP

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Γερμανία

Αντιπρόσωπος στην Αυστραλία:

Sonova Australia Pty Ltd
Locked Bag 5006 Norwest,
NSW, 2153
Αυστραλία

029-1126-20/V3.01/2021-10/NLG © 2021 Sonova AG All rights reserved



Κατασκευαστής:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Ελβετία
www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

CE
0459

